

ESC256 - LED FÉNYTERÁPIÁS ARCMASZK TÁVVEZÉRLŐVEL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

LED
EMS



ELKONcosmetic

SZÍNTERÁPIA

A színterápia (kromoterápia) ősi eredetű gyógymód, a hagyományos orvoslási módok mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak a színek egészségre és lélekre gyakorolt hatásának. A színek gyógyító energiáját már évszázadok óta használják különböző terápiákban. Bár a színeknek az emberi szervezetre gyakorolt hatásával, kísérletekkel alátámasztott bizonyítását csak az 1900-as években kezdték meg. Már a régi egyiptomiak is kihasználták gyógyító hatásukat mind a kozmetikában, mind pedig magában az orvoslásban.

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a különböző színek különféle hangulatokat váltanak ki belőlünk. A színterápiában a színek gyógyító, stimuláló hatásait használjuk ki. A színek gyógyító és közérzetjavító hatása megsokszorozódik a színterápia használatával.

A színek szervezetre gyakorolt hatásáról általában:

Romantikus piros, nyugtató zöld

Az anyag színét az határozza meg, hogy a Nap sugaraiból mennyit nyel el, illetve mely sugarakat veri vissza. Életünket el sem tudjuk képzelni színek nélkül. Lakásunkat, környezetünket megtöltjük kedvenc színeinkkel, pillanatnyi hangulatunkat is jól kifejezhetjük azzal, hogy milyen színű ruhát veszünk fel. Már igen régóta használjuk a színeket kommunikációra, gondoljunk pl. arra, hogy egyáltalán nem mindegy, bizonyos alkalmakra milyen színű virágot adunk vagy kapunk. Tudjuk azt is, hogy a kórházak zöldre festett falai nemcsak a festő ízlését dicsérik, hanem a betegek nyugalalmát is szolgálják.

Arról azonban talán már kevesebben hallottak, hogy a színes fények a hangulatunkon kívül, az egészségi állapotunkat is befolyásolják. A színterápia éppen arra a megfigyelésre alapszik, hogy a különféle árnyalatok más és más reakciókat váltanak ki belőlünk.

Sárga

A sárga, a közhiedelemmel ellentétben nem az irigység, hanem az értelem és a megértés színe. Könnyíti a tanulási folyamatot, élénksége enyhíti a depressziót és vigaszt nyújthat a napi csalódások után. Ha sárga színű izzót használunk, a lakást a melegség érzése járja át. Persze a színek, s így a sárga fény is, testi panaszainkat is csökkenthetik. A napsárga sugarak enyhítik a bélműködési zavarokat, a gyomorbetegségek egy részét, a fény melegsége erősíti immunrendszerünket, sőt termékenységi problémák megoldásában is segítséget nyújthat.

Piros

A piros a tűz és a föld színe. Általában akkor használjuk, ha romantikus hangulatot szeretnénk teremteni. A piros fény melegségérzetet kelt, és fokozza a test vérbőségét is. S ha nem csupán a hálószobában használjuk, hamarosan rájövünk, hogy egy piros színű villanykörte segítségével serkenthetjük a szervezet méregtelenítését. A piros fény légzőszervi hurutok, középfülgyulladás és jó néhány bőrbetegség kiegészítő kezelésére is alkalmas.

Narancssárga

A narancs kevert szín, a piros és a sárga elegye, így ötvözi a két szín tulajdonságait. Ez a szín, fény formájában is, melegséget, jószágot, megértést közvetít. Fokozza az étvágyat és a kíváncsiságot. Testi hatásai: máj- és hasnyálmirigy-problémák orvoslása, vérszegénység, tüdőbajok kezelése, de a kedélyállapot rohamos javulása is jótékony hatásai közé tartozik.

Zöld

A természet egyik alapszíne, erős nyugtató hatása van, ezért igen jó a központi idegrendszer bajainak kezelésére. A régiek úgy tartották, hogy a zöld szín felelős testünk ritmikus tevékenységeinek, a szívnek és a tüdőnek a működéséért. Talán ez a magyarázata, hogy olyan hatékony a szív- és a keringési panaszok, valamint a magas vérnyomás enyhítésében.

Kék

A kék különböző árnyalatai másként hatnak ránk. Az ég kékje élesíti intuícióinkat, megnyugtatja lelkünket és gondolatainkat. Remek a helyi gyulladások enyhítésére, szemölcsök visszaszorítására, szem- és fülgyulladás csökkentésére.


Az ibolyakék a piros és a kék keveréke, e két szín tulajdonságait ötvözi. A gyógyulás, a tudati kiegyensúlyozottság és a belső nyugalom színe. Segíti a gyógyulást, a gyors és könnyű álmot és a depressziósok megnyugvását is.

Az ultraibolya fényről mindenkinek a káros sugárzás, az ózonlyuk és a bőrrák jut eszébe, pedig a mesterséges fényforrásokból kis adagokban érkező UV-fény gyógyító hatású. Ekcémák, szőrtüszőgyulladások, gyulladt pattanások eltüntetésében segíthet napi három-hat perc ultraibolya fény.

A szín- és fényterápia kiegészítő kezelés, alkalmazható lelki és testi bajaink orvoslására. Helyi kezelés - amikor a beteg testrészeire irányítjuk a jótékony fénysugarakat - és egész testre alkalmazott kúra is létezik. A hangulatok és lelki állapotok megváltoztatásában játszott vitathatatlan a szerepe. Ha egy nehéz nap után olvasólámpájába becsavar egy színes izzót, és alatta pihen, sokkal frissebb és vidámabb lesz, mint egy egyszerű szunyókálás után. A hatást fokozhatjuk, ha zene- és aromaterápiával együtt használjuk.

Távvezérlő kezelő szerveinek ismertetése:

1. arcmaszok csatlakozója
2. nyakmaszk csatlakozója
3. Multifunkciós kijelző
4. Bekapcsolva állapot jelző
5. Villogási seb. állapot jelző
6. EMS intenzitás csökkentő
7. EMS intenzitás növelő
8. Kezelési idő csökkentő
9. Szín választó/start
10. Tápegység csatlakozó
11. EMS/fény állapot jelző
12. „C8” színváltás végtelenített
13. EMS intenzitás növelő
14. Kezelési idő növelő
15. Fényerősség

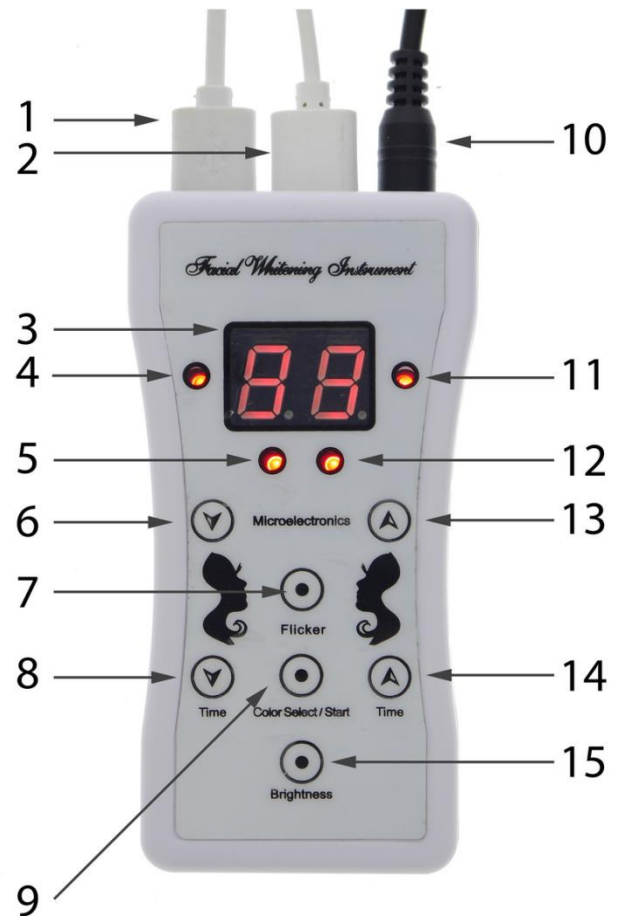

A távvezérlő segítségével az alábbi beállításokat tudja elvégezni:

Fényterápia és EMS funkció külön-külön vagy kombináltan

Be/Ki kapcsolás

Színek kiválasztása 7 lépésben, illetve ezek automatikus, ütemes váltogatása

Fényerősség szabályozása

Pulzáló fény sebessége 3 lépésben, illetve folyamatos mód

EMS intenzitás szabályozása

Kezelési idő beállítás

Kezelés megkezdése:

Csatlakoztassa a maszkot a távvezérlőhöz és a hálózati adapterhez majd a hálózathoz.

Vendége kényelmesen fekvő helyzetben helyezkedjen el a kezelőágyon.

Illessze vendége arcára a maszkot úgy, hogy az EMS elektródák jól érintkezzenek az arcbőrrel.

Az EMS elektródák jobb érintkezése érdekében kontaktus javító anyag használata javasolt.

A távvezérlőt bekapcsolva kiválaszthatók a kezelési paraméterek.

Az NV-W118 LED arcmaszok 7 különböző színkezelést tesz lehetővé.

A vörös fény

A "biológiai aktivitás fénye" néven ismert 630 nm-es hullámhossz. Egyidejűleg gyorsítja a sejtek aktivitását, az anyagcseréjét és elősegítheti a kollagén képződését. Fokozza a helyi vérellátást a sejtek tápanyag és oxigén ellátását. Stimulálja a sejtképződést ezáltal rugalmasabb és feszesebb lesz az arcbőr, csökkennek a ráncok, lassítja az öregedési folyamatokat.

A kék fény

A 470 nm-es hullámhosszúság a hámrétegre hatva a bőrproblémák miatt kialakuló gyulladásoo folyamatokat lassítja, csökkenti a bőr kipirosodását. Eredményesen gátolja propioni baktérium szaporodását ami felelős az akne és pattanások kialakulásáért. Helyreállítja a bőrt, javít a pigment fokon.

A zöld fény

Hullámhossz 520nm-es, kedvezően hat a pigment képzési folyamatokra, harmonizálja a bőr színbeli eltéréseit és halványítóan hat a fokozottan pigmentált területekre. Nyugtatja a bőrt, csökkenti a hajszálerek láthatóságát és segít a különféle értágulatok okozta bőrelváltozások, mint pl. rosacea tüneteinek enyhítésében. Serkentően hat a kötőszövet nyirokellátására és a pangó nyirokfolyadék elszállítására is.

A sárga fény

Az 590 nm hullámhosszú fény kezelése javítja a sejtek oxigénellátását és a nyirokműködést. Növeli az irhában lévő kollagén és elasztikus rostok termelődését, így javítva a bőr tömörségét és visszaadva annak fiatalos feszességét. A rugalmas rostok aktiválása révén javíthatjuk a szöveti állomány vízmegtartó képességét és annak hidratációját.

A lila fény

Piros és kék fényfrekvencia, kétféle fototerápiás hatást ötvöz, különösen jó hatással van és javítja a pattanások kezelését és eltávolítja a pattanások hegeit.

A cianin fény

Fokozatosan növeli a sejtek energiáját, felgyorsítja az anyagcserét.

A fehér fény

Mélyen behatol a bőrbe, felgyorsítja az aktív szövet anyagcseréjét, lebontja a foltot, javítja a finom vonalakat és a laza bőrt eredményez.

Kozmetikai alkalmazások:

Ráncok kezelése

Aknés gyulladások mérséklése

Bőrfeszítés, face-lifting

Szövetek tartásának, tömörségének javítása

Baleseti hegek kezelése

Anyagcsere folyamatok optimalizálása Bőrtisztítás utáni hegek gyógyulásának gyorsítása

Alulműködő bőrök aktiválása

Figyelmeztetés! A következő területeken és esetekben ne alkalmazza a fényterápiás kezelést:

Közvetlenül a szemek felett

Akkut gyulladós állapotoknál

Melanóma, nem beazonosítható bőrelváltozások és bőrdaganatok esetén Friss sebek sérülések meglétekor Idegrendszeri rendellenességnél

Terhesség esetén

Nyirokmirigy rendellenesség esetén

Fényérzékenység meglétekor Fényérzékenységet okozó gyógyszerek szedése alatt Keringési rendellenesség esetén

Szteroid injekció kúra alatt

Termál hatású (szöveti hőtermelő) krémekkel, oldatokkal szérumokkal kombinálva. Gyermekeknél 15 percnél tovább egy-egy területen

FONTOS!

A fényterápiás kezelés során ügyeljen arra, hogy a maszk megfelelően rögzítve legyen, a szemet védő szilikon formák megfelelően védjék, ugyanakkor a szemek csukva legyenek és direkt fény ne érje azokat!

A kezelés során ne alkalmazzon a maszk alá kozmetikumokat a bőr mindig száraz legyen.

A maszkot kezelés előtt és után fertőtlenítse.

A használati útmutató nem helyettesíti a szakképesítést!

Tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert.

Fokozottan ügyeljen az arcmaszk biztonságos tárolására, soha ne ejtse le mert sérülhet vagy eltörhet. Az egymáshoz illeszthető arcmaszk elemeket ne feszegesse eltörhet.

Törés, mechanikai sérülés garanciavesztéssel jár.

A LED maszkot csak a hozzáadott tápforrással szabad működtetni.



Az EMS funkció hatékony működése érdekében ügyeljen az elektróda gumik illeszkedésére a réz felületeken !

Forgalmazza: *ELKON* cosmetic Kft.

H-2143 Kistarcsa, Völgy u. 41.

Web: www.elkon.hu

Email: elkon@elkon.hu

[Tel: +36-28-472129](tel:+3628472129)

Mobil: +36-70-9492198