



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEGANTE 880 4IN1 MICRODERM +
HIDRODERM + VÁKUUM + SPRAY

M-880-as modell

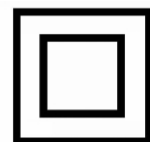

Műszaki adatok:

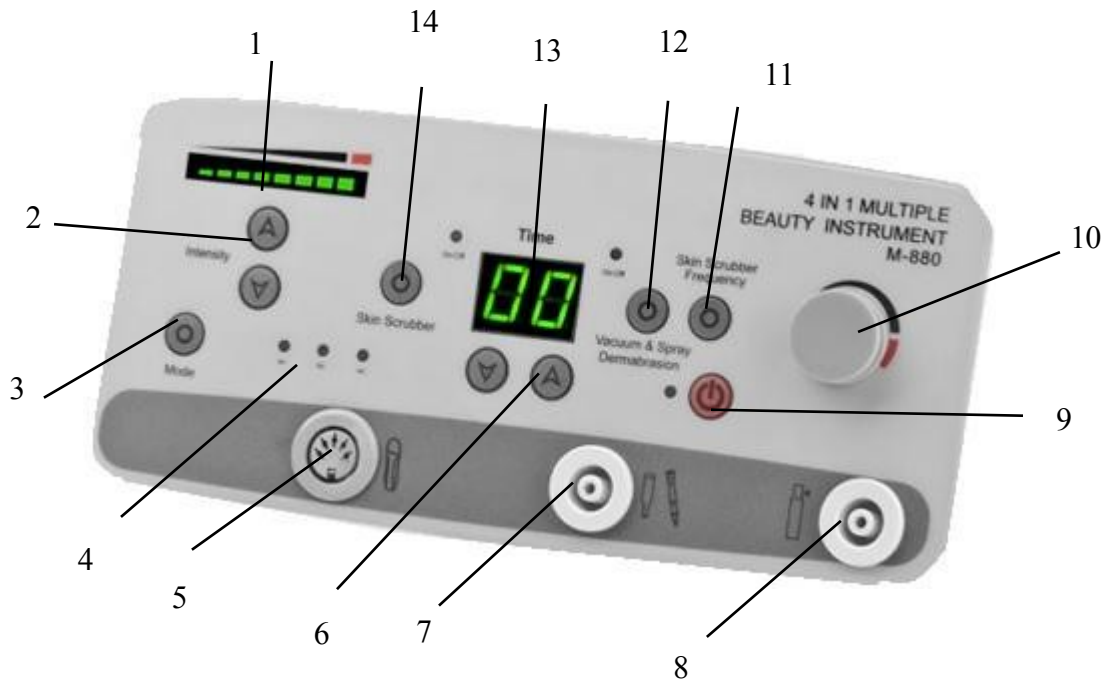

- | | |
|---|---|
| 1. Kavitációs hámlás intenzitásának mutatója, | 7. Vákuum és mikrodermabrázió kombinációja |
| 2. A kavitációs hámlasztás intenzitásának beállítása, | 8. Csatlakozó spray |
| 3. Válogatás a kavitációs hámlasztás kezelési lehetőségeiből, | 9. On/Off eszköz |
| 4. Kavitációs hámlasztó munkafény, | 10. Szívóteljesítmény beállítása |
| 5. Kavitációs hámlás csatlakoztatása, | 11. Kavitációs hámozás frekvenciájának szabályozása |
| 6. Időbeállítás | 12. On/off vákuum, spray, mikrodermabrázió |
| | 13. Idő kijelző |
| | 14. On/off kavitációs hámlás. |

A **kavitációs peeling** lényegében a bőr fájdalommentes tisztítása ultrahangos rezgéssel. Lehetővé teszi a pórusokból és a szőrtüszőkből a felesleges faggyú alapos eltávolítását, valamint a mitesszerek eltávolítását. A hámlasztás során a kavitáció jelensége lép fel, amely akkor következik be, amikor az ultrahang folyadékkal érintkezik, majd mikroszkopikus gázbuborékok képződnek, és egy sor kémiai folyamat következik be, amelyek a szaruréteg elhalt sejteinek lebontását eredményezik.

EREDMÉNYEK

- Ovális arc és feszes bőr,
- A bőr szerkezetének feszesítése,
- Felületes ráncok simítása,
- A szem alatti táskák és a szarkalábak csökkentése,
- Kollagén rekonstrukció,
- Anti-aging terápia - megelőzés,
- A szennyeződések, kitágult pórusok csökkentése,
- A bőr szerkezetének feszesítése.
- Bőrtisztítás.

MIKRODERMABRÁZIÓ

Ez egy olyan kezelés, amely során a felhám felszíni rétegeit csiszoló gyémánthegek és szívóerő segítségével hámlasztják.

A mikrodermabrázió hatékony kezelés a finom vonalak, a szarkalábak, a hiperpigmentáció és az aknés hegek csökkentésére. Serkenti a bőrsejtek és a kollagén épülését. Nagyon népszerű nem invazív kozmetikai kezelés. Rendszeres használata esetén minden bőrtípus esetében nagyszerű eredményeket produkál. Az eredmények azonnal észrevehetőek.

Jelzések

- pattanásos hegek,
- mitesszerek, mitesszerek,
- kitágult pórusok,
- érdes, bőrkeményedéses bőr,
- a bőr petyhüdsége,
- bőrfiatalítás és a szem, a száj és a nyak körüli finom vonalak és ráncok eltüntetése,
- striák,
- száraz bőr,
- elszíneződés és elszíneződés,
- a bőr (arc, kéz, nyak) napozás okozta károsodása,
- periwinkle keratosis,
- Acne vulgaris (comedonális, papuláris),
- faggyúmirigy.

Ellenjavallatok

- vírusfertőzések,
- bakteriális fertőzések,
- gombás fertőzések,
- gennyes és gennyes pattanások,
- rosacea,
- szemhéjbőr,
- megszakadt bőrfolytonosság,
- bőrrák és anyajegyek,
- barlangi angiomák,
- Pattanásos kezelés Roaccutannal (legalább 3 hónapos szünet ajánlott),
- hajlam a keloidok (hegesedés) kialakulására,
- arcplasztika (legalább két hónapos szünet ajánlott).


Figyelem!

A mikrodermabráziós kezelőfejeknek tisztának és fertőtlenítettnek kell lenniük.

A kezelést száraz bőrön végzik.

A mikrodermabrázióhoz használt pamutszűrők eldobhatóak.

Fejmozgások

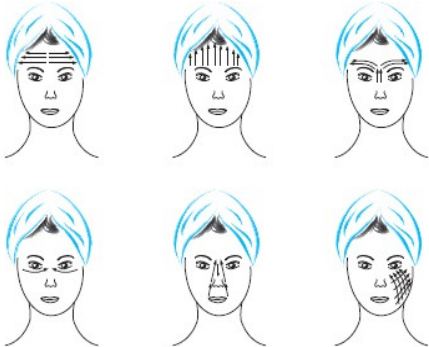

Fúvóka	
Szűrő b aweful	
Fej	

VACUUM

Ez egy olyan kezelés, amely szívóerőt és a kezelési területhez megfelelően kiválasztott kézidarabokat használ.

INDIKÁCIÓK:

- mitesszerek,
- kitágult pórusok,
- érdes, bőrkeményedéses bőr
- a bőr petyhüdsége,
- striák,



- száraz bőr.

Spray

A bőr kíméletes tonizálására szolgál a vákuum és a tartályban lévő tonik segítségével.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus végezhet!
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a szervihez!

a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolat megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon a következőkhöz a veszélyek elkerülése végett egy erre felhatalmazott szervizközpont által.
2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban

Ami az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát illeti, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát elkülönítve kell gyűjteni, és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékgyűjtő pontjain kell leadni.

Az elhasználdott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket csak eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.