


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vapozon Giovanni D-008

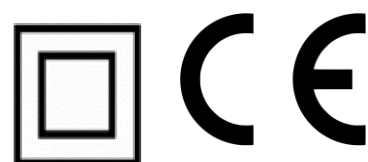

Műszaki adatok:

Névleges feszültség	220V/240V
Elektromos energia	800W
Névleges frekvencia	50/60Hz
Kapacitás	600ML
Gőz hőmérséklete	Körülbelül 40°C (20 cm-re a fúvókától)

Használat előtti megjegyzések:

- Ne használja a készüléket fürdőkád, mosdókagyló vagy más nedves edény közelében.
- A hőérzékelésre képtelen személyek nem használhatják a hajót. Ez égési sérüléseket okozhat a testen.
- Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha bármilyen fájdalmat vagy rendellenességet tapasztal a bőrén vagy a testén.
- A következő személyek nem használhatják a terméket:
 - Terhes vagy menstruáló nőknél a hormonális egyensúlyhiány miatt bőrproblémákat okozhat.
 - Allergiában, bőrbetegségben, atópiás dermatitiszben, érzékeny bőrben szenvedők vagy súlyos leégésen átesettek.
 - Bőrsérülésekkel, ekcémával, duzzanatokkal stb. küzdő emberek.
 - Olyan személyek, akiknek nemrégiben műtéti beavatkozáson estek át.
- A dugó csatlakoztatásakor ne érintse meg a fémrészeket.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, ha nem használja a készüléket. Ennek elmulasztása tüzet okozhat.
- A por felhalmozódásának megakadályozása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket. A nedvesség és más tényezők a szigetelés kilyukadását okozhatják.
- Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré, ez meghibásodást okozhat. kábelek.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket a megfelelő feszültségű áramforrásról táplálja. Győződjön meg arról, hogy a dugó helyesen van-e behelyezve a konnektorba. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket a konnektorból nedves vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket a következő körülmények között:
 - Ha a kábel vagy a dugó felmelegszik vagy megsérül;
 - Ha a dugó meglazult a konnektorban;
- A kábelt nem szabad módosítani, nyújtani, túlzottan meghajlítani vagy csavarni.
- A kábelre semmi nehéz nem helyezhető.
- Megakadályozza, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben. Ez áramütéshez, tűzhöz vagy a szigetelés károsodásához vezethet.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint például: alkoholok, oldószerek, benzin, spray aeroszolok stb. Ez robbanást vagy tüzet okozhat. Ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni. A készülék működéséhez szükséges vízmennyiséget a tartályból töltsse fel.
- Az eszközt nem szabad megütni vagy eldobni. Ha a készülék ütközés vagy esés következtében megsérül, nem használhatja tovább.
- A fúvókába semmilyen alkatrészt nem szabad behelyezni vagy becsípni, mivel ez áramütést okozhat.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a berendezést. A javításhoz forduljon a forgalmazóhoz, akitől a berendezést vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

Jellemzők:

1. A készülék automatikusan kikapcsol, ha a tartályban lévő vízszint nem elegendő.

2. A készülék meleg gőzt termel.
3. A készülék rendelkezik "ózon" funkcióval.

Megjegyzés a bőrön történő alkalmazásról

1. A túlzott használat káros a bőrre.
2. Kezdetben a készüléket naponta csak egyszer, legfeljebb 10 percig szabad használni.
3. Normál bőr esetén hetente 2-3 alkalommal, érzékeny bőr esetén hetente egyszer használja.
4. Ha használat közben kellemetlen érzés jelentkezik a bőrön, a kezelést azonnal abba kell hagyni.
5. A gőz megnyitja az eltömődött pórusokat, lehetővé téve a bőr mélytisztítását.
6. A gőz enyhíti az öregedés jeleit és megtisztítja a bőrt a méreganyagoktól.
7. A kezelés javítja a vérkeringést is.
8. A kezelés után ajánlott a bőr hidratálása.
9. A készüléket rendszeresen tisztítani kell.

Előkészítés

1. Amikor először nyitja ki a csomagolást, előfordulhat, hogy a tartályban vízmaradványokat lát. Ez a víz a gyári minőségellenőrzés után visszamaradt víz, és nem okoz higiéniai problémát.
2. Helyezze a készüléket egy sima, stabil felületre.
3. Csavarja le a víztartályt. Töltse fel a víztartályt (**szűrt vagy desztillált vízzel**) és csavarja el a kupakot.
4. Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő áramforráshoz.
5. Kapcsolja be a készüléket. A készülék hangjelzéssel jelez, ha a készülék nincs, szennyeződött vagy elégtelen víz.
6. A forró gőzkezelés aktiválásához nyomja meg a "POWER" gombot, amely pirosan világít. Töltse fel a vizet a maximális szintig. A fűtőberendezés elkezd melegíteni a vizet, és egy idő után meleg pára kezd felszállni.
7. Az "OZONE" gomb megnyomásával a gőz mennyisége jelentősen megnő.
8. A waponon feje forgatható.
9. A hiba jelzése után a készüléket újra kell indítani.

Ápolási utasítások

1. Tartsa a fúvókát legalább 20 cm-re az arcától, hogy az egész arcát beborítsa a gőz. Irányítsa a gőzsugarat az álla tetejéig.
2. A készülék elindítása után néhány tíz másodperccel kezd gőz felszállni.
3. Ha a víz mennyisége nem elegendő, a gőzsugár ennek megfelelően csökken. Ha nincs elég víz, a készülék automatikusan kikapcsol. Ne vegye ki a víztartályt közvetlenül a készülék kikapcsolása után. A víztartálynak legalább 10 percig kell hűlnie, különben leforrázáshoz vezethet.
4. Ha a készülék vízhiány miatt automatikusan leáll, várjon kb. 2 percet, amíg a vezérlő újraindul, és a készülék újra működésbe léphet.
5. Ne hagyjon vizet a tartályban. Ha végezt, ürítse ki és szárítsa meg a tartályt.



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.

2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célok kivételével más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus végezhet.

3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a szervizhez!

a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolat megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.

9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon a következőkhöz a veszélyek elkerülése végett egy erre felhatalmazott szervizközpont által.

2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.

3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban

Ami az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát illeti, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát elkülönítve kell gyűjteni, és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékgyűjtő pontjain kell leadni.

Az elhasználdott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.