

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Multifunkciós gép Elegante Platinum T9



Az Elegante Platinum T9 egy professzionális kombinált multifunkcionális készülék, amely a legújabb technológiai fejlesztések előnyeit élvezi. A nagy, dönthető képernyővel ellátott futurisztikus burkolat kiváló minőségű alkatrészekből készült, az intuitív menü pedig megkönnyíti a használatát. A készüléket a kozmetikai és esztétikai gyógyászat számára tervezték. A kozmetikai kombinátor kiváló megoldás a szépségszalonokban, lehetővé téve az elvégzett kezelések körének jelentős bővítését. A készülék lehetővé teszi a kezelések elvégzését a fiatalítás, az akné elleni terápia, az érrendszeri, a pigmentáció elleni, a cellulit elleni, a karcsúsítás, a testformálás területén.

Ultrahang

Az ultrahangterápiához tervezett fejek az emberi fül hallásküszöbét meghaladó frekvenciájú akusztikus hullámokat használnak, hogy megkönnyítsék a hatóanyagok behatolását a bőr mélyebb rétegeibe, befolyásolva a kezelések hatékonyságát. Emellett a bőr mély mikromasszázsát is biztosítják, aktiválva az érintett sejteket, hogy hatékonyan termeljenek kollagént és elasztint, hozzájárulva a bőr mélyreható regenerációjához, támogatva annak természetes megújulási folyamatait és javítva általános állapotát.

Rádiófrekvencia (RF)

A nagyfrekvenciás rádióhullámok mélyen behatolnak a bőr minden rétegébe, hatékonyan felgyorsítva a szövetek regenerálódását. Ez a kezelés rádiófrekvenciás energiát használ a bőr mélyebb rétegeinek felmelegítésére, ezáltal serkenti a kollagén- és elasztintermelést, táplálja és oxigénnel látja el a bőrt, az eredmények már az első kezelés után láthatóak. A kezelés után a bőr rugalmasabbá válik, a ráncok kisimulnak és felszínre kerülnek. A kezelés a szarkalábak, a ráncok vagy a vitalitáshiányos bőr elleni küzdelemben is szövetséges lesz.

Hűtőfej

A kezelés során hűtik az erythema, a megrepedt hajszálerek és az angiomák által érintett területeket, így mély enyhülést biztosítanak. Fontos szerepet játszik a bőr hűtésében, a duzzanat csökkentésében, a hemangiómák és az erythema enyhítésében, valamint az izmok ellazításában. Javítja az ügyfelek komfortérzetét, különösen a hőtermelést okozó kezelések során, és fokozza a kozmetikai eljárások hatékonyságát. Bőrnyugtató funkcióval rendelkezik, növeli az ügyfél komfortérzetét, csökkenti a lehetséges mellékhatásokat és támogatja számos kozmetikai eljárás hatékonyságát.

Gyémánt mikrodermabrázió

Speciális fejeket használ a szaruréteg kíméletes eltávolítására. Hatékonyan eltávolítja az elhalt sejteket, szennyeződéseket és kisebb tökéletlenségeket, miközben serkenti a regenerációs folyamatokat. A kezelés biztonságos és kényelmes, javítja a bőr textúráját, csökkenti a ráncokat és eltávolítja a bőrhibákat az azonnali eredmények érdekében. A kezelés után a bőr megújul, simává és ragyogóvá válik, hosszú távú regenerálódás nélkül. Ideális a bőr hatékony javításához invazív eljárások nélkül.

Bio Skin Lifting

A nem invazív kezelés, amely hatékony megoldást jelent a szike használata nélküli liftingre vágyók számára, mikroáramok alkalmazásán alapul. Ez a fajta elektrostimuláció növeli az izomrostok összehúzóerejét, munkára serkenti az izmokat, és ezáltal felgyorsítja a mérgező anyagok és a felesleges víz kiválasztásának folyamatát a szervezetből. Az impulzusok stimulálják a bőr mélyebb rétegeiben a kollagént és az elasztint, ami a bőr rugalmasságának és feszségének javulásához, valamint a finom vonalak és ráncok csökkenéséhez vezet. A legmodernebb Bio Skin Lifting kezelés teljesen fájdalommentes, és hosszan tartó eredményként feszesebb, rugalmasabb, simább és fiatalosabb arcbőrt eredményez.

Tű nélküli mezoterápia

A bőrápolás területén egyre elismertebbé váló innovatív kezelés alapja az elektroporáció és az elektrooszmózis. A kezelés hatásai közé tartozik: **a** mélyen fekvő sejtek táplálása, a nyirokvezetés elősegítése, az anyagcsere felgyorsítása, a nyirok- és vérkeringés javítása, a ráncok csökkentése, a bőr ragyogása, a megfelelő hidratáltsági szint fenntartása, a cellulitisz megszüntetése, a zsírégetés felgyorsítása és a testformálás. Lehetővé teszi a bőrápoló anyagok hatékonyabb felszívódását, alkalmazkodik a bőr egyéni igényeihez, átfogó ápolást nyújt.

Bőrradír - Kavitációs peeling

A kavitációs hámlasztás kíméletesen, vibrációval, elektromos áram használata nélkül hat a bőrre. A kezelés lényege, hogy a bőrt ultrahanghullámok segítségével tisztítják meg, amelyek a kavitáció jelenségét, azaz a légbuborékok nagy nyomás alatt történő szétpukkanását okozzák, ami lehetővé teszi a bőr mély ápolását és regenerálódását mellékhatások nélkül, friss arcbőrt kölcsönözve az arcbőrnek. Lehetővé teszi a bőr mélyreható regenerálódását azáltal, hogy azonnal és hatékonyan megújítja és megtisztítja a bőrt, csökkenti a pórusokból a felesleges faggyút, megszabadítja a keratinizált hámrétegtől, **a** mitesszerektől és a baktériumoktól. Kiválóan előkészíti a további kozmetikai kezeléseket.

VIO

Ez a nagyfrekvenciás áramot alkalmazó kozmetikai kezelés a bőr állapotának javítására szolgáló innovatív módszer. A d'Arsonval-áramok serkentik a vérkeringést, ami segít táplálni és oxigénnel ellátni a bőrszöveteket. Hatékony a bőrproblémákra, kiválóan alkalmasak a pattanások kezelésére, valamint a finom vonalak és ráncok csökkentésére, a bőr rugalmasságának javítására. Emellett baktériumölő hatásuk hozzájárul a gyulladás enyhítéséhez és elősegíti a bőr gyógyulási folyamatát. Ez a kezelés átfogó hatásainak köszönhetően egyre népszerűbb a kozmetikai iparban.

Spray

A folyadékok egyenletes felvitelére, hidratálására, tonik vagy ködök felvitelére, valamint a bőr hűtésére szolgál. Tökéletes a bőr kozmetikai eljárásokra való előkészítéséhez, és kíméletes előtisztításra is használható. Ideális módja az optimális hidratáltsági szint fenntartásának, ami egészséges és ragyogó arcbőrt eredményez. A szórófej aromaterápiás anyagok permetezésére is használható. Kiegészítő funkciót tölt be, lehetővé téve a kozmetikus számára, hogy személyre szabja a kezeléseket és élvezetesebbé tegye a bőrápolási kezeléseket.

A készlet a következőket tartalmazza: készülékalap, fejkészlet, mikrodermabráziós tippkészlet, Vio elektróda készlet, fejtartó, kesztyű, tápegység, biztosíték, használati utasítás.

Fej
hűtés


Ultrahang
(szemkörnyék
)

Ultrahang
(arc)

RF (a szem körül)

RF (test)

Mezoterápia

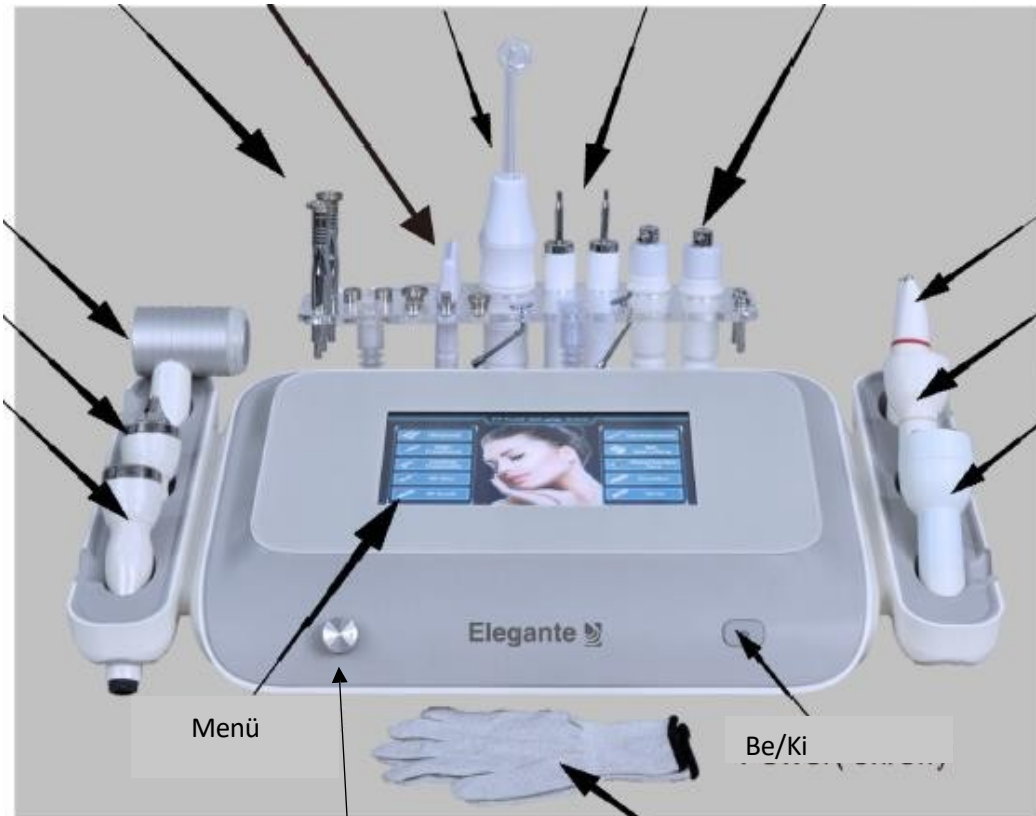

Menü

Be/Ki

Szívóteljesítmény
beállítása
(mikrodermabrázió)

Kesztyű

A tápkábel csatlakoztatása



Kezelőfejek
csatlakoztatása

Kapcsoló

0/IF Külső szűrő
mikrodermabrázió
hoz


Ultrahang

Darsonwal

Hűtőfej

RF (a szem
körül)

RF (arc/test)

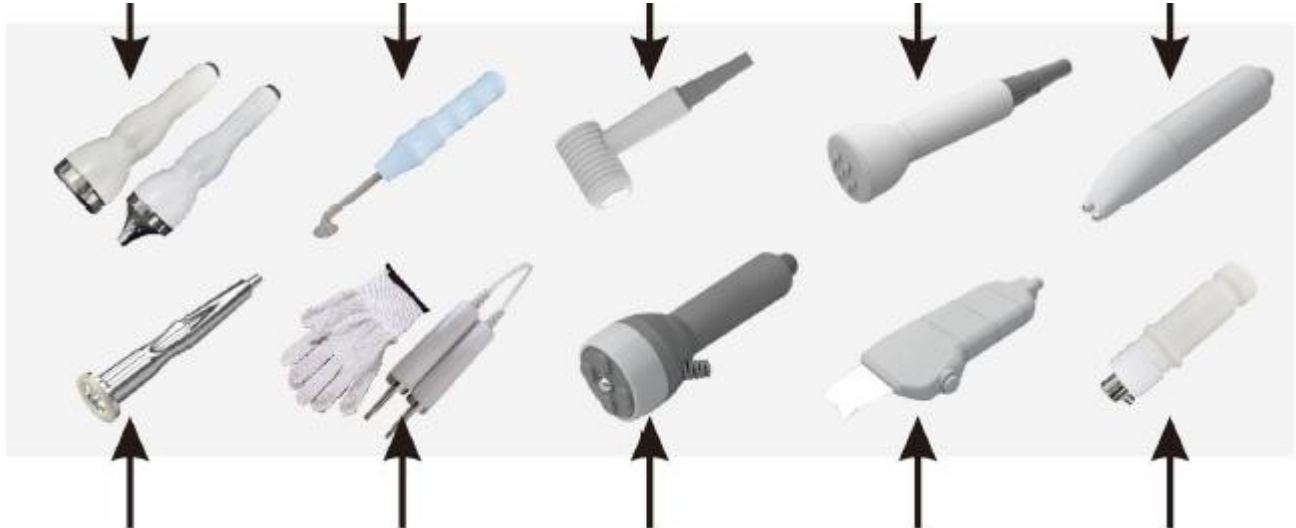


MikrodermabrázióBio Skin Lifting

MezoterápiaCavitáló hámlasztás Spray


A fejek csatlakoztatása




Arc ultrahang

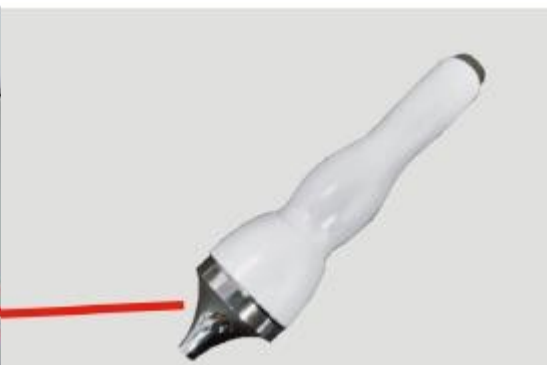


Ultrahangos szemkörnyék

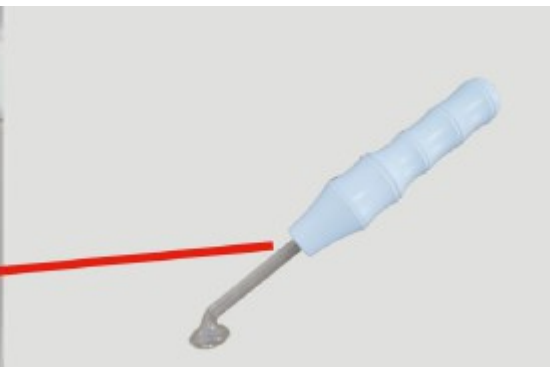


A VIO
összekötése

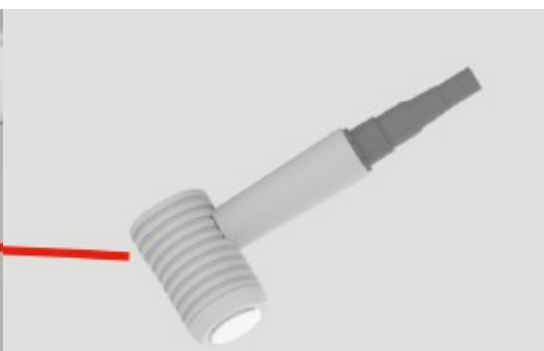


Hűtőfej csatlakozás

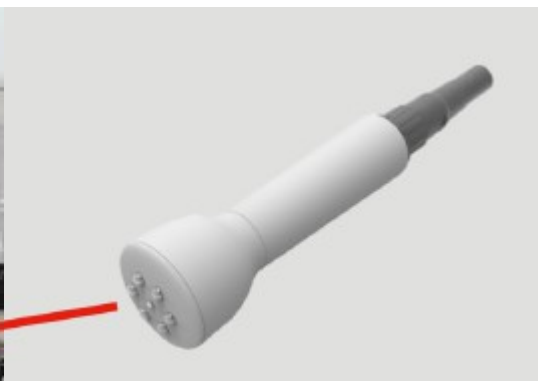

RF fej test/arc csatlakoztatása

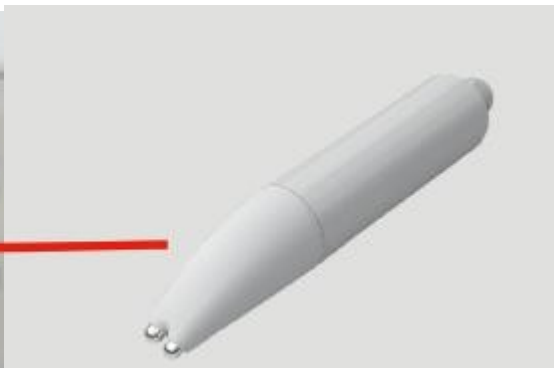

RF fej csatlakoztatása a szem körül

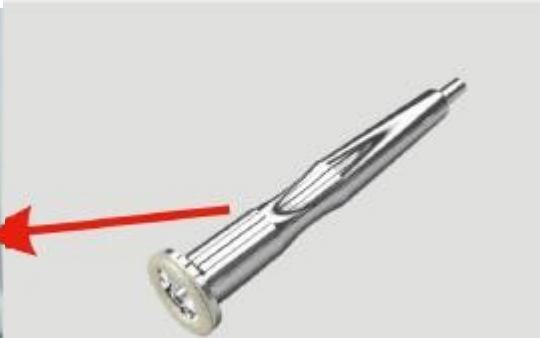


A mikrodermabráziós
fej csatlakoztatása



A fej csatlakoztatása a
Bio Skin Liftinghez



A mezoterápiás fej csatlakoztatása

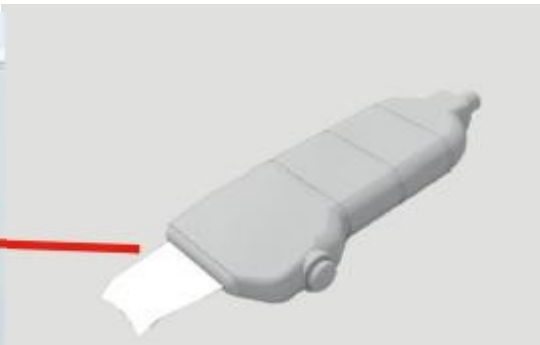

hidroabráziós fej

A csatlakoztatása



A szórófej csatlakoztatása

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Csatlakoztassa a tartozékokat a megfelelő bemenethez, majd csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez, és kapcsolja be a "On/Off" gombbal. Kattintson a főképernyőn a megfelelő funkcióra, és állítsa be a kezelési paramétereket (idő, intenzitás és üzemmód). Ezután nyomja meg a Start/Stop gombot a kezelés megkezdéséhez.



Működési jelzőAz idő

kiválasztása

Visszatérés

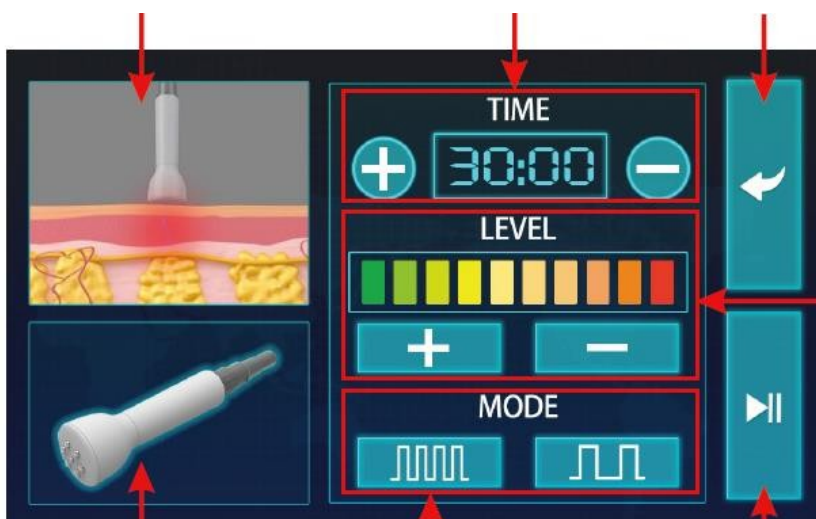

Intenzitás kiválasztása

A fej
kiválasztása

A kezelési lehetőség
kiválasztása


Start/Stop

Ultrahang

1. Válassza ki a megfelelő kezelőfejet.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemenethez.
3. Válassza ki az ultrahangot a főképernyőn.
4. Válassza ki a megfelelő paramétereket a kezeléshez.
5. Indítás bekapcsolása.



Példák a fejmozgásokra:

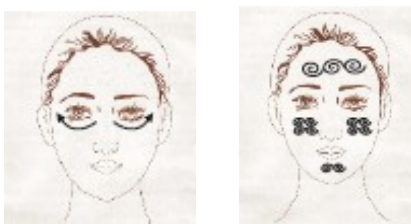

VIO

1. Válassza ki a megfelelő kezelőfejet és pelotát.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemenethez.
3. Válassza ki a darsonval a főkijelzőn.
4. Válassza ki a megfelelő funkciókat a kezelés elvégzéséhez.
5. Indítás bekapcsolása.



Kezelési lehetőségek

A kezelő fejet közvetlenül a kezelt területre alkalmazzák. A kezelés során az ügyfél enyhe bizsergést és meleget érezhet. Időtartam 5-7 perc, gyakoriság heti 2-3 alkalommal. **KÖZVETLEN:** az áramok jobban irritálják a bőrt, ha az elektródát felváltva távolítják el és helyezik fel a bőrre. Az ügyfél enyhe bizsergést érezhet.

Hűtőfej

1. Válassza ki a megfelelő kezelőfejet.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemenethez.
3. Válassza ki a hideg fejet a fő kijelzőn.
4. Válassza ki a megfelelő funkciókat a kezelés elvégzéséhez.
5. Indítás bekapcsolása.






Példák a hűtőfejjel történő kezelés közbeni mozgásokra.



Rádiófrekvenciás

1. Válassza ki a megfelelő kezelőfejet.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemenethez.
3. Válassza ki az RF-fejet a főkijelzőn.
4. Válassza ki a megfelelő funkciókat a kezelés elvégzéséhez.
5. Indítás bekapcsolása.



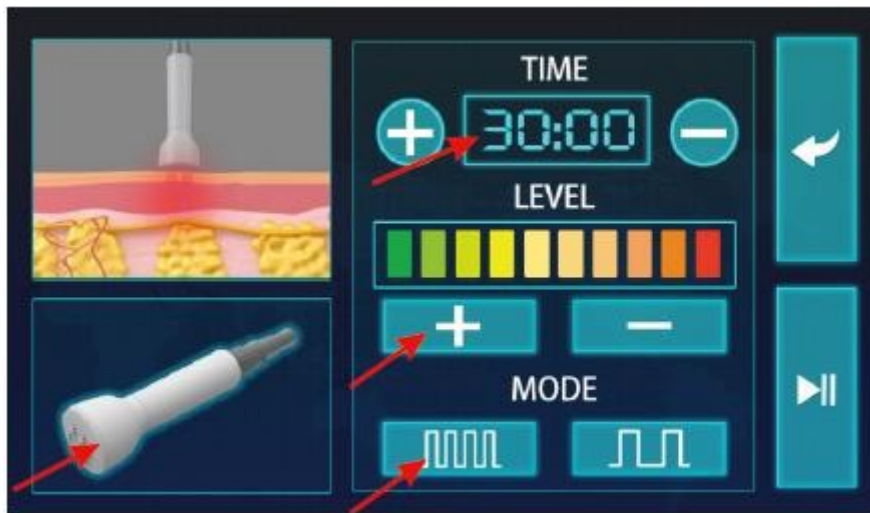

MEGJEGYZÉS!!! A kezelés az **1-es** intenzitással kezdődik, az erősséget a kliens érzéseinek megfelelően választjuk ki.


A mozgások vagy körkörösek, vagy oda-vissza mozognak. A fej nem állhat meg egy helyben. **Maximális kezelési idő 15 perc - arc.**

Maximális kezelési idő 30-45 perc - test.

Példák a kezelési mozgásokra:



Rádiófrekvenciás arckezelés:

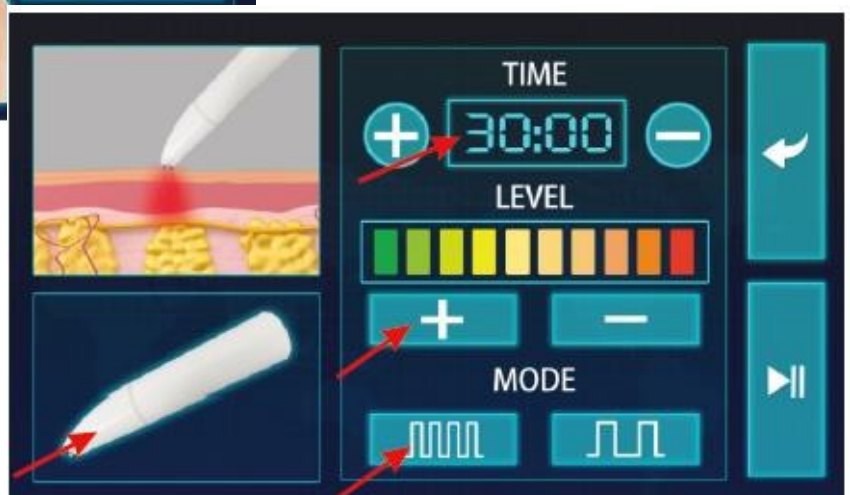


MEGJEGYZÉS!!! A kezelés az **1-es** intenzitással kezdődik, az erősséget a kliens érzéseinek megfelelően választjuk ki.

A mozgások vagy körkörösök, vagy oda-vissza mozognak. A fej nem állhat meg egy helyben. **Maximális kezelési idő 15 perc - arc.**

Maximális kezelési idő 30-45 perc - test.

Javasolt fejmozgások:

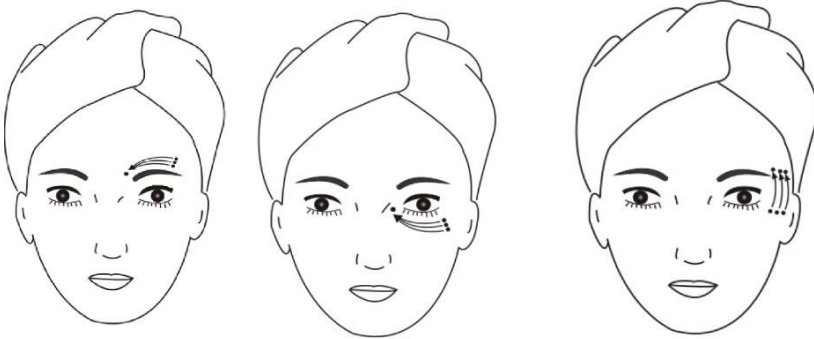


Gyémánt mikrodermabrázió

1. Válassza ki az ügyfél bőrének megfelelő fejet, és alkalmazza a kiválasztott kézidarabot.
2. Csatlakoztassa a tömlőt a megfelelő bemenethez.
3. Válassza ki a kezelési időt a fő kijelzőn.
4. Állítsa be a szívóteljesítményt a készülék elején található tárcsával.
5. Indítás bekapcsolása.



Példák a fejmozgásokra

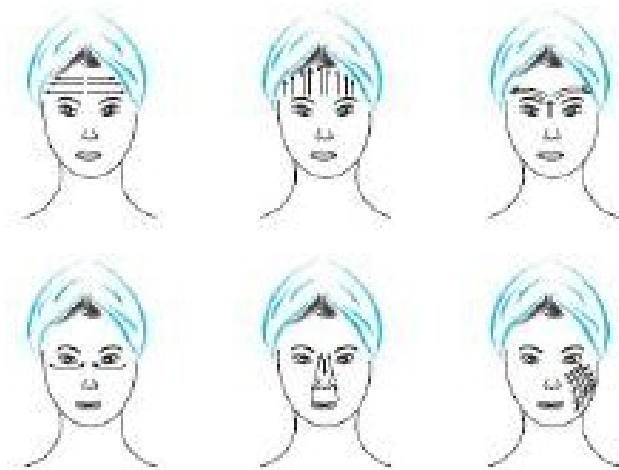

Szűrő tisztítása




Csatlakoztassa a kulcsot a szűrőhöz Csavarja ki a szűrőt a fentiek szerint Tisztítsa és fertőtlenítse a teljes szűrőt



Szűrő kicsavaró kulcs

A fejek fertőtlenítése

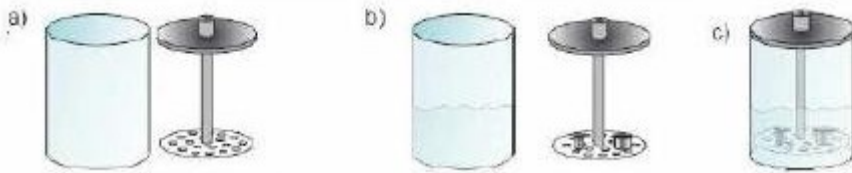

1. Edénynyitás.
2. Öntse bele a megfelelő fertőtlenítőszert, és helyezze a fejegeket az edénybe.

A fejek fertőtlenítéséhez ultrahangos tisztítót is használhat.

Bio bőrfiatalítás



A kezelés fejjel vagy kesztyűvel végezhető.

1. Válassza ki a megfelelő kezelőfejet vagy kesztyűt.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemenethez.
3. Válassza ki a Bio skin lifting fejet a főképernyőn.
4. Válassza ki a megfelelő funkciókat a kezelés elvégzéséhez.
5. Indítás bekapcsolása.



Mezoterápia

1. Válassza ki a megfelelő kezelőfejet.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemenethez.
3. Válassza ki a mezoterápiás fejet a fő kijelzőn.
4. Válassza ki a megfelelő funkciókat a kezelés elvégzéséhez.
5. Indítás bekapcsolása.

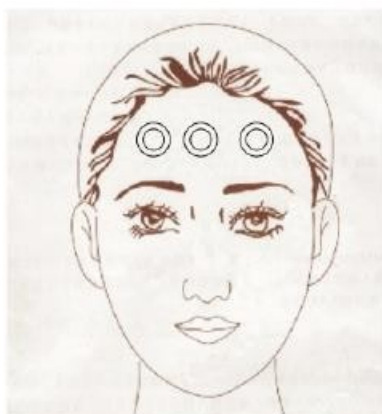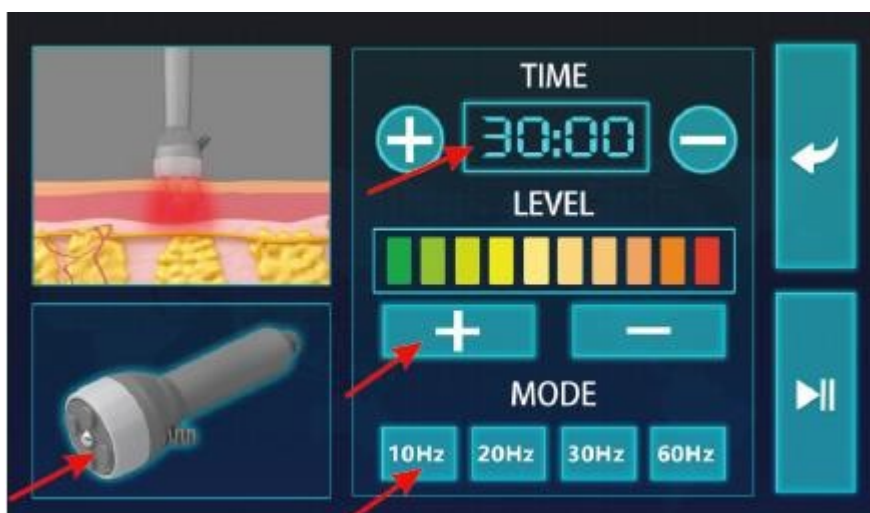

Kavitációs peeling


1. Válassza ki a megfelelő kezelőfejet,
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemenethez,
3. Válassza a fő kijelzőn a Scrubber (Mosó) lehetőséget,
4. Válassza ki a megfelelő funkciókat a kezeléshez
5. Indítás bekapcsolása



A megtisztított bőrre kis mennyiségű vizet kell felvinni. A kezelések során a bőrt folyamatosan nedvesíteni kell.

5. Kapcsolja be a P funkciót, és indítsa el a kezelést. Tartsa a spatulát 45°-os szögben, és nyomja meg a gombot a 3. ábrán látható módon.

Szonoferézis - a kezelés megkezdése előtt a megfelelő ampullát és ultrahanggélrt kell alkalmazni.

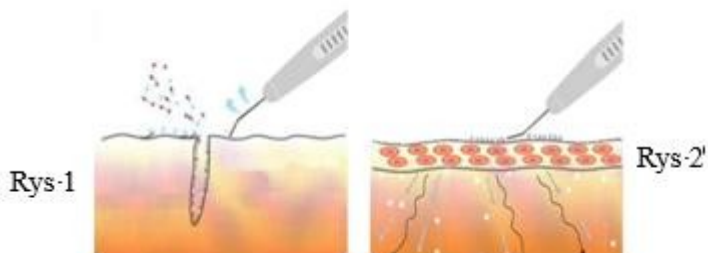

3. ábra

Spray

A szórófej tonik vagy hidratáló permetezésére szolgál. Válassza ki a megfelelő kozmetikumot, és töltsse meg vele a flakont, az ügyfél igényeitől függően.

1. Válassza ki a megfelelő kezelőfejet.
2. Csatlakoztassa a megfelelő bemenethez.
3. Válassza ki a Spray (permetezés) lehetőséget a főképernyőn.
4. Válassza ki a megfelelő funkciókat a kezelés elvégzéséhez.
5. Indítás bekapcsolása.



Karbantartás

Használat előtt ellenőrizze a készüléket és minden alkatrészt. Ha az elektromos kábelek eldeformálódtak, elszakadtak vagy lecsatlakoztak, cserélje ki a kábelt egy újjal. Minden kezelés után alaposan tisztítsa meg a készüléket és fertőtlenítse a fejeket.

Biztosíték csere

A biztosíték cseréjekor végezze el a következő lépéseket:

- 1) Kapcsolja ki a készüléket a 0/I gombbal;
- 2) Húzza ki a hálózati csatlakozót;
- 3) Nyissa ki a biztosítékot egy csavarhúzóval.
- 4) Távolítsa el a hibás biztosítékot, és cserélje ki az új biztosítékot.
- 5) Helyezze vissza a biztosítékot az eredeti helyére;
- 6) Csatlakoztassa a dugót;

MEGJEGYZÉS!

A biztosíték cseréjekor kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a konnektorból az áramütés elkerülése érdekében.

A készüléket szellős és száraz helyen kell elhelyezni, és használaton kívül a portól és a napfénytől védeni kell.

A kezelés ellenjavallatai

- Pacemaker, fém implantátumok,
- Bőrbetegségek,
- Magas vérnyomás, cukorbetegség,
- Terhesség vagy szoptatás
- Állandó vagy ideiglenes töltőanyagok a testben,
- Hidroxi savas kezelés, lézeres kezelés, kémiai hámlasztás vagy sebgyógyítás.
- Véralvadásgátlók vagy izotretinoic (retinoic) sav szedése.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolat megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból minden alkalommal húzza ki a tápkábelt a konnektorból, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz - így elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányában tapasztalatlan és kevésbé képzett személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megérthessék.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban

Ami az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát illeti, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát elkülönítve kell gyűjteni, és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékgyűjtő pontjain kell leadni.

A teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazó régi készülékeket hasznos élettartamuk végén újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIV Tomasz Pacholczyk vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket csak eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.