


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Multifunkciós kombinált gép 27in1 Redline



ELSŐ PANEL	3
OLDALPANEL.....	4
KAVITÁCIÓS PEELING.....	4
EREDMÉNYEK	4
ELLENJAVALLATOK.....	5
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE	5
KEZELÉSI MÓDSZERTAN	5
ULTRA	7
EREDMÉNYEK	7
ELLENJAVALLATOK.....	7
KEZELÉSI MÓDSZERTAN	7
GALVANIZÁCIÓ	8
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE	9
VIO	9
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE.....	10
KEZELÉSI MÓDSZERTAN.....	10
MIKRODERMABRÁZIÓ	10
A GYÉMÁNT MIKRODERMABRÁZIÓ ELŐNYEI.....	10
EREDMÉNYEK.....	10
ELLENJAVALLATOK	10
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE.....	11
KEZELÉSI MÓDSZERTAN.....	11
HIDEG/MELEG VASALÓ	12
HIDEG FEJ	12
MELEG FEJ.....	12
TÚ NÉLKÜLI MEZOTERÁPIA.....	13
EREDMÉNYEK.....	13
ELLENJAVALLATOK	13
GARANTÁLT HATÁSOK EGY SOR KEZELÉS UTÁN	13
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	14
ARCKEZELÉS.....	14
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE.....	14
TESTKEZELÉS VÉGREHAJTÁSA	14
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE.....	15
ELEKTROKOAGULÁCIÓ.....	16
VACUUM.....	16
EREDMÉNYEK.....	16
SPRAY.....	16
WOODA LÁMPÁK.....	17
WAPOZON.....	17
PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK	17
TARTOZÉKOK LISTÁJA	18
 BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK	 40


ELSŐ PANEL

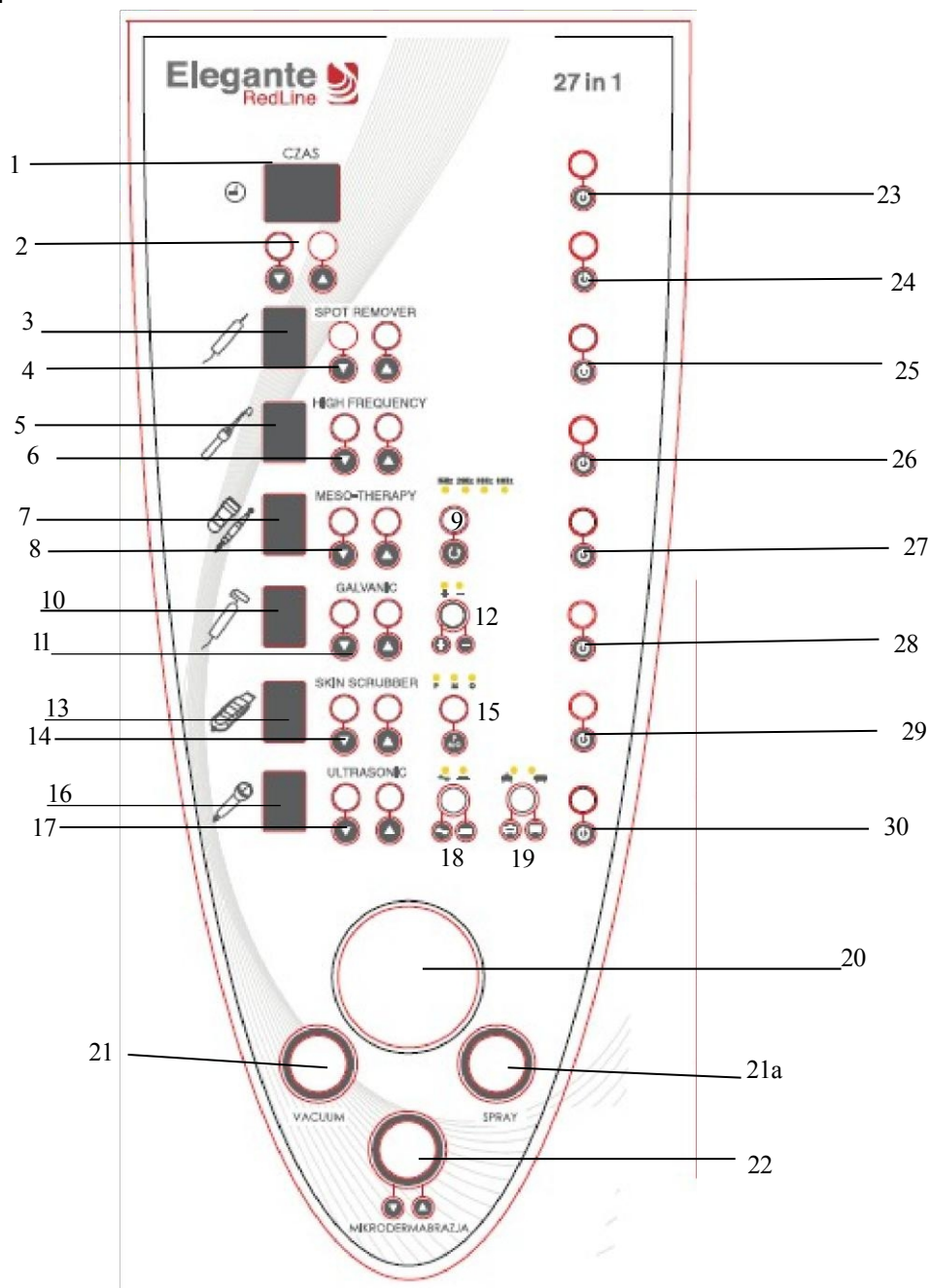

1. Idő kijelzés,
2. Idő beállítás,
3. Intenzitás kijelző,
4. Intenzitás szabályozás,
5. Intenzitás kijelző,
6. Intenzitás szabályozás,
7. Intenzitás kijelző,
8. Intenzitás szabályozás,
9. Frekvencia szabályozás,
10. Intenzitás kijelző,
11. Intenzitás szabályozás,
12. Választható bevonat + vagy -,
13. Intenzitás kijelző,
14. Intenzitás szabályozás,
15. A kezelési lehetőség kiválasztása,
16. Intenzitás kijelző,
17. Intenzitás szabályozás,
18. A kezelési hullám kiválasztása,

19. A kezelőfej kiválasztása,
20. Vákuummérő,
21. Mikrodermabrázió bejárata, vakum, 21a spray
22. Nyomásszabályozás
23. -30 Az egyes panelek be- és kikapcsolása.

OLDALPANEL

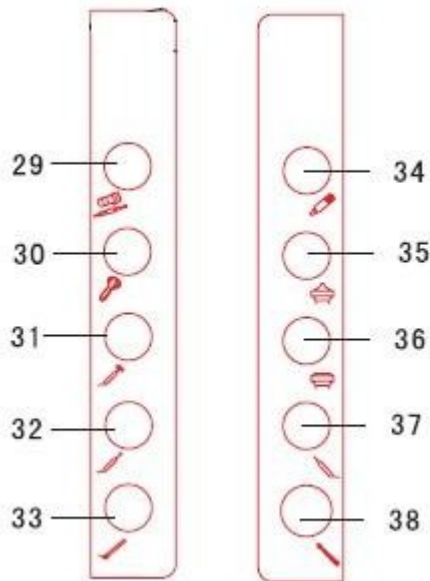

29. Belépés a mezoterápiából,
30. A hideg-meleg fej bemenete,
31. Galvanizálásból származó bejárat - rolon,
32. Bevitel a galvanizáló golyóból,
33. Passzív elektróda,
34. Belépés kavitációs hámlásból,
35. Bemenet a fejről az ultrahangosra,
36. Az ultrahangfej bemenete, 37. Az elektrokoaguláció bemenete,
38. Darsonwala hozzájárulása.

KAVITÁCIÓS PEELING

A kavitációs peeling lényegében a bőr fájdalommentes tisztítása ultrahangos rezgéssel. Lehetővé teszi a pórusokból és a szőrtüszőkből a felesleges faggyú alapos eltávolítását, valamint a mitesszerek eltávolítását. A kavitációs peelinget mikromasszázzsal gazdagítják, hogy javuljon a szövetek keringése és oxigénellátása, ami a hatóanyagok fokozott behatolását eredményezi.

A peeling alkalmazásakor a kavitáció jelensége akkor következik be, amikor az ultrahang folyadékkal érintkezik, mikroszkopikus gázbuborékok képződnek, és egy sor folyamat zajlik le vegyi anyagok, amelyek hatására lebontják a száru réteg elhalt sejtjeit.

EREDMÉNYEK

- Ovális arc és állfelvarrás,
- A bőr szerkezetének feszesítése,
- Felületes ráncok simítása,
- A szem alatti táskák és a szarkalábak csökkentése,
- Kollagén rekonstrukció,
- Anti-ageing terápia - megelőzés - szennyeződések, tág pórusok csökkentése
- A bőr szerkezetének feszesítése.

ELLENJAVALLATOK

Terhesség,

A bőr folytonosságának megzavarása,

Gombás, bakteriális, vírusos elváltozások,

Az idegrendszer betegségei,

Mentális betegség,

epilepszia,

Rák (kezelés alatt és után), fertőzések,

A bőr azon része, amely alatt fém (pl. drót egy csontban, miután az eltört), műanyag, szilikon (pl. szilikon implantátumok a mellekben) található,

A bőr azon részei, ahol orvosi és elektronikus műszerek, például hallókészülékek, pacemakerek, műszív stb. találhatók,

12 év alatti gyermekek,

Bőrrészek fém elemekkel a testben (pl. hasi piercing), nagy nyomás,

Cukorbetegség,

Szívbetegség.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Kapcsolja be a készüléket a fő tápegységre az O/I gombbal, Válassza ki a kezelés típusát a 15 gombbal, Válassza ki az intenzitást a 14 gomb segítségével,


•A kezelés megkezdéséhez nyomja meg a 29-es gombot.

A bőr előkészítése a kezelésre:

A kezelés előtt alaposan tisztítsa meg a bőrt, és távolítsa el a sminkmaradványokat. A kezelés végeztével tonizálhatja a bőrt, lehetőleg enyhe tonikkal.

KEZELÉSI MÓDSZERTAN


A tonikkal benedvesített arcon végezzen kavitációs peelinget (P mód), kezelési idő 10-15 perc. Tartsa a spatulát 45 fokos szögben (1. ábra).

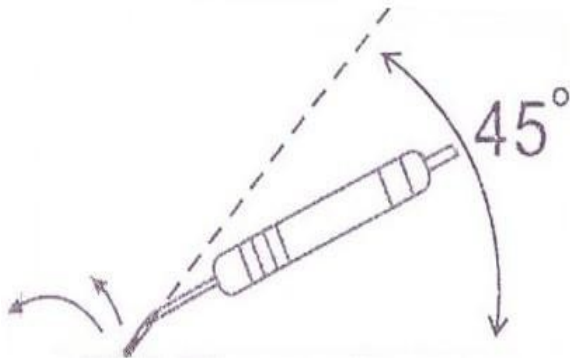

1. ábra


Megfelelő spatulaszög a kavitációs hámozáshoz



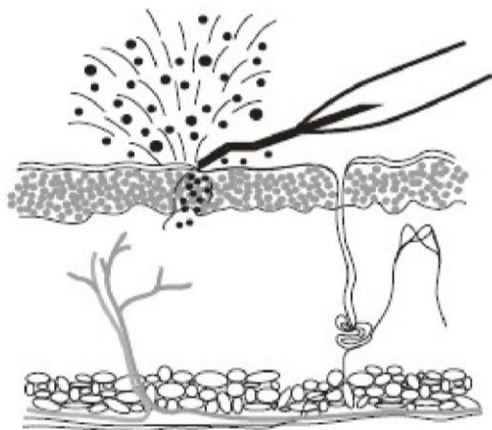


P kezelési lehetőség

Ezután alkalmazza a javasolt SYIS-ampullák egyikét és a **hűtőgél**t az arcra **és a bőrre**.
szonoferezis kezelés

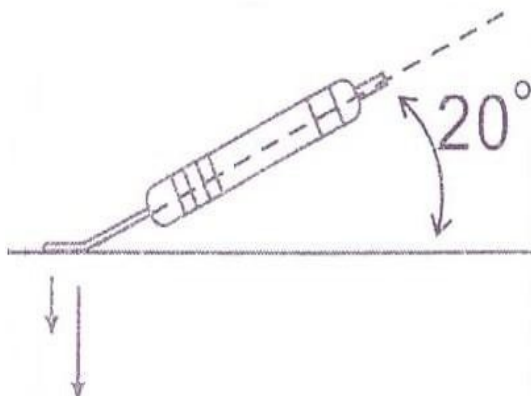


- Nyomja meg a gombot (9) a kívánt kezelési mód kiválasztásához,
- A kezelés megkezdéséhez nyomja meg a START gombot (7).

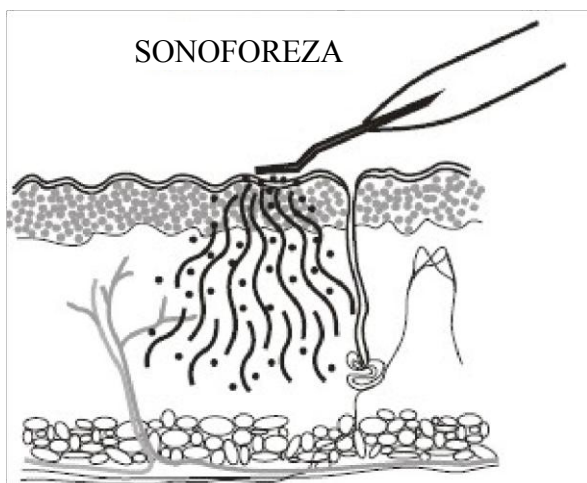

M kezelési lehetőség

FERTŐZÉS

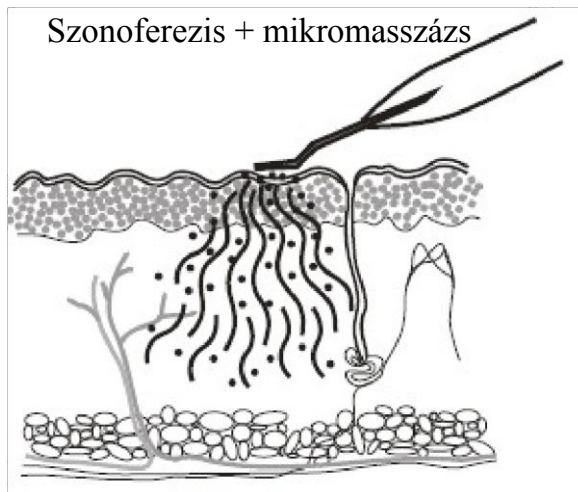

O kezelési lehetőség

A hámozó spatulát AHD kézfertőtlenítővel erősen benedvesített kozmetikai párnával fertőtlenítjük.

ULTRADISMS

Ez egy olyan rendszer, amely a hatóanyagokat mélyen a bőrbe szállítja. A készülék kihasználja a sejtmembránokban az ultrahang hatására fellépő fizikai jelenséget, amelynek köszönhetően egyetlen kezelés hatása akár 72 órán át tart a bőrben.

A kezelés teljesen fájdalommentes, a kezelés során az ügyfél érezheti a fejből érkező enyhe rezgést.

EREDMÉNYEK

Az arc ovális részének és az állnak a megemelése, a bőrszerkezet feszesítése, Felületes ráncok simítása, A szem alatti táskák és a szarkalábak csökkentése, kollagénrekonstrukció, Anti-aging terápia - megelőzés, A szennyeződések, kitágult pórusok csökkentése, A bőrszerkezet feszesítése.

ELLENJAVALLATOK

Terhesség,
A bőr folytonosságának megzavarása,
Gombás, bakteriális, vírusos elváltozások,
Az idegrendszer betegségei,
Mentális betegség,
epilepszia,
Rák (kezelés alatt és után), fertőzések,
A bőr azon része, amely alatt fém (pl. drót egy csontban, miután az eltört), műanyag, szilikon (pl. szilikon implantátumok a mellekben) található,
A bőr azon részei, ahol orvosi és elektronikus műszerek, például hallókészülékek, pacemakerek, műszív stb. található,
12 év alatti gyermekek,
Bőrrészek fém elemekkel a testben (pl. hasi piercing), nagy nyomás,
Cukorbetegség,
Szívbetegség.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Kapcsolja be a készüléket a fő tápegységre az O/I gombbal, Válassza ki a kezelés típusát a 18 gombbal, Válassza ki a fej típusát a 19. gombbal Válassza ki az intenzitást a 17. gombbal, A kezelés megkezdéséhez nyomja meg a 30-as gombot. A kezelés előtt alaposan tisztítsa meg bőrét

KEZELÉSI MÓDSZERTAN


Az ultrahanggél az **arcra** kell felvinni.

A kiválasztott ultrahangfej egyikét az így előkészített bőrre helyezzük. Kezelési idő 15-20 perc az arcon, 15-30 perc a testen.

Javasolt ultrahangos fejmozgások az arc számára:



Az ultrahangos fej javasolt mozgása a testen:

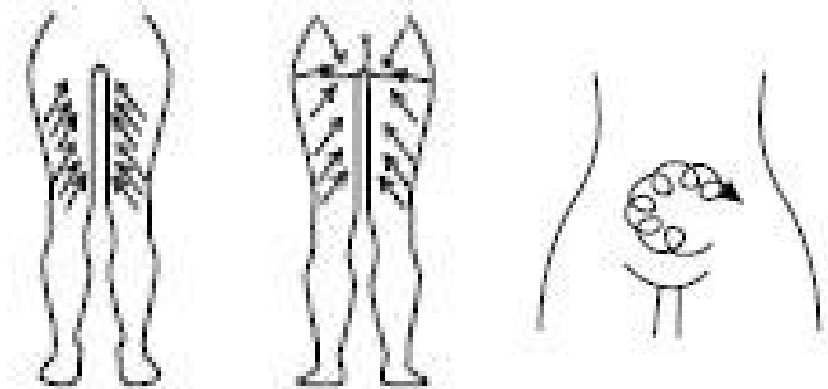

FERTŐZÉS

Az ultrahangfejet AHD kézfertőtlenítővel erősen benedvesített vattakoronggal fertőtlenítjük.

GALVANIZÁCIÓ

A galvanizáló kezelés során az egyik elektróda (anódos vagy katódos elektród) terápiás tulajdonságait használják ki. Az iontoforézis kezelés esetében a gyógyszerekben található elektrolitokat mélyen a bőrbe juttatják. Az egyenáramú kezelések **elektródákat** használnak.

EREDMÉNYEK

irritált bőr,
tágult erek (telangiectasiák), rosacea,
kitágult pórusok,
fagyás, érrendszeri
neuropátia,
neuralgia.

ELLENJAVALLATOK

a bőr és a lágszövetek gennyes és gyulladásos
állapotai, lázas állapotok,
kenőcsök, gyógyszeres krémek korábbi használata 28 nap után,
mentális betegség,
Spasztikus bénulás,
érzékelési zavarok,
megszakadt
bőrfolytonosság,
szívműködési zavarok,
belső szervek betegségei,
reumatikus betegségek,
bőrgyógyászati betegségek,
idegrendszeri betegségek,
terhesség,
daganatok,

a test fém részei, aktív
tüdőtuberkulózis.

MEGJEGYZÉS!!!

A kezelés megkezdése előtt ki kell zárni az ellenjavallatokat, A kezelt személynek minden ékszert el kell távolítania,
Az intenzitást az ügyfél érzéseinek megfelelően választjuk meg.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Kapcsolja be a készüléket a fő tápegységre az O/I gombbal, Válassza ki a kezelés típusát a 12 gombbal, Válassza ki az intenzitást a 11 gomb segítségével, Nyomja meg a 28-as gombot a kezelés elindításához.

A kezelés előtt alaposan mossa és tisztítsa meg a bőrt

KEZELÉSI MÓDSZERTAN

Az arc galvanizálásához vízzel erősen benedvesített gézt alkalmazunk, iontoforézishez a gél felhelyezése előtt megfelelő, ionos disszociációra képes ampullát alkalmazunk. **Két** kezelőfejet egyszerre alkalmazunk a kezelt bőrre a keringés lezárása érdekében. Kezelési idő 15 perc az arcon, 30 perc a testen.

FERTŐZÉS

Az elektródákat AHD kézfertőtlenítővel erősen benedvesített vattakoronggal fertőtlenítjük.

DARSONWAL

A D'Arsonval-áramok a nagyfrekvenciás áramok egyik változata. Biológiai hatásuk alapja a szövetekben közvetlenül minimális hőmennyiség előállítása. A készülék a pelletekben fellépő elektrosztatikus kisülések révén állít elő ózont. A darsonizációs kezelés során 300 és 500 kHz közötti frekvenciájú áramokat használnak.

A d'Arsonval-áramok hatása főként az erekre gyakorolt hatáson alapul és a vegetatív idegvégződésekre. Az elektróda és a bőr között létrejövő szikrázás az erek értágulását okozza, ami hatással van a bőr alatti szövetekre. A keletkező ózon fertőtlenítő hatású.

INDIKÁCIÓK:

- Bőrzérzékenységi zavarok,
- Alopecia areata,
- A keringési rendszer stimulálása,
- Bőrfertőtlenítés,
- Viszketés,
- Frostbite,
- Neuralgia kezelése

ELLENJAVALLATOK:

- Terhesség
- Hipertónia
- Duzzanatok
- Ideges hiperaktivitás
- Szívbetegségek
- Gyulladásos bőrbetegségek
- Láz

- Asztma
- Epilepszia
- Fém implantátumok
- Akne rosacea
- Kitágult erek
- Allergiás bőrbetegségek

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Kapcsolja be a készüléket a fő tápegységre az O/I gombbal, Válassza ki az intenzitást a 6 gombbal.

A kezelést megelőzően a bőrt alaposan meg kell mosni és meg kell tisztítani.

KEZELÉSI MÓDSZERTAN

Az eljárás elvégzése előtt alaposan szárítsa meg a kezelt területet.

A kiválasztott pelotát szalicilsavval fertőtlenítyük, és megkezdjük a kezelést.

Az áram intenzitása egyénileg az ügyfélhez van igazítva.

Kezelési idő 5-7 perc.

A kívánt idő leteltével kapcsolja ki a kazettát a POWER gombbal.

MIKRODERMABRÁZIÓ

Ez egy olyan kezelés, amely során a felhám felszíni rétegeit csiszoló gyémánthegek és szívóerő segítségével hámlasztják.

A mikrodermabrázió hatékony kezelés a finom vonalak, a szarkalábak, a hiperpigmentáció és az aknés hegek csökkentésére. Serkenti a bőrsejtek és a kollagén épülését. Nagyon népszerű nem invazív kozmetikai kezelés. Rendszeres használata esetén minden bőrtípus esetében nagyszerű eredményeket produkál. Az eredmények azonnal észrevehetőek.

A GYÉMÁNT MIKRODERMABRÁZIÓ ELŐNYEI

biztonságos, ellenőrzött mélységű csiszolás, a kémiai hámlasztást nem tűrők alternatívája,

az alkalmazott hatóanyagok felszívódási szintjének növelése, a mikrokeringés serkentése,

A bőr védekezőképességének erősítése - A bőr kollagén- és elasztintermelésének serkentése (a bőr megújulása).

EREDMÉNYEK

Pattanásos hegek,

mitesszerek, fehér

mitesszerek, tág pórusok,

érides, bőrkeményedés, bőr

petyhüdség,

bőrfiatalítás és a finom vonalak és ráncok eltüntetése a szem, a száj és a nyak körül,

striák,

bőrszárazság,

hiperpigmentáció és

elszíneződés,

a bőr (arc, kéz, nyak) napozás okozta károsodása,

perifollikuláris keratosis,

Akne vulgaris (comedonális, papuláris),

seborrhoea.

ELLENJAVALLATOK

Vírusfertőzések, bakteriális

fertőzések, gombás

fertőzések,

gennyes és gennyes pattanások,

rosacea,

szemhéjbőr,
megszakadt bőrfolytonosság,
bőrdaganatok és anyajegyek,
barlangi angiomák,
Roaccutannal végzett akne kezelés (legalább 3 hónapos szünet ajánlott), hajlam a keloidokra (hegesedés),
arcplasztika (legalább két hónapos szünet ajánlott).

Menstruáció esetén nincs ellenjavallat,
napbarnított bőr,
terhesség az arckezelés esetében.

A KEZELÉS GYAKORISÁGA:

5-10 kezelésből álló sorozat,
pattanás elleni kezelés - a kezelések közötti időköz 3 hét, ráncptalanító
kezelés - a kezelések közötti időköz 10-15 nap

A KEZELÉS UTÁN FELLÉPŐ TÜNETEK:

24-48 órával a kezelés után is fennmaradó
erythema, bizsergő érzés, viszketés,
bőr túlérzékenység.

BŐRÁPOLÁS OTTHON

a napozás kerülése a kezelést követő egy hétig,
a klóros vízben (uszodában) való úszás kerülése a kezelést követő 72 órán keresztül.
Legalább 30-as magas fényvédő faktorral rendelkező nappali krémeket kell használni.


LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Kapcsolja be a készüléket a fő tápegységre az O/I gomb
segítségével, Helyezze be a piros tömlőt a bemenetbe 21
Nyomja meg a 23-as gombot a kezelés
elindításához, A tárcsával állítsa be az
intenzitást (22).

A kezelés előtt alaposan mossa és tisztítsa meg a bőrt

KEZELÉSI MÓDSZERTAN

A fúvóka és a mikrodermabráziós fej csatlakoztatása:

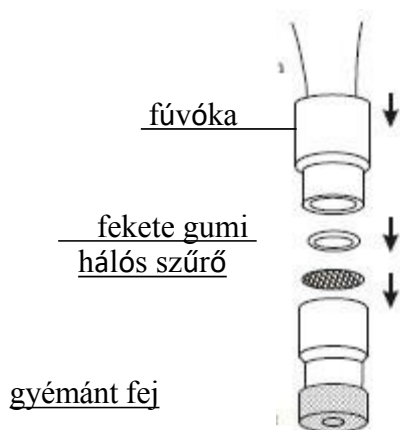



- Fúvóka mikrodermabráziós fejjel,

A kezelést 20-25 percig alkalmazza a megtisztított, teljesen megszártított arcbőrre.

HOT/COLD HEAD

A hideg-meleg fej egyidejűleg 40°C-ra melegít és 10°C-ra hűt.

COLD HEAD

Enyhíti az irritációt és a bőrpírt. A fej használható kézi tisztítás, mikrodermabrázió, savas kezelés után a bőrpír enyhítésére.

HŐFÚTÉS

A kezelés előtt a meleg fejet az erek tágítására használják. A vaponon alternatívájaként is használható - a maszkon masszírozást végzünk. stresszoldás.

A váltakozó meleg és hideg fejek használata érrendszeri tornaként az erek lezárására és megerősítésére.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Kapcsolja be a készüléket a fő tápegységre az O/I gombbal, Kapcsolja be a készüléket a fejen lévő indító/szünet gomb segítségével,
Ha a fűtőfej felmelegszik, a piros működési lámpa kigyullad.

A kezelés megkezdése előtt alaposan mossa meg és tisztítsa meg az arcát. Ezután alkalmazhatja a hialuronsavas gélt.

Hideg fej működési lámpa Meleg fej

működési lámpa

Start/szünet fej



TÚ NÉLKÜLI MEZOTERÁPIA

A tú nélküli mezoterápia egy modern és nem invazív módszer, amely lehetővé teszi a hatóanyagok mélyen a bőrbe történő szállítását:

elektromos mezőt az elektroporáció jelenségének, az ultrahanghullámoknak a segítségével.

Az elektroporáció a sejtmembránban nagyfeszültségű elektromos mezők hatására lejátszódó folyamat. Elektromos tér hatására a sejtmembrán (különösen a lipidkomponensek) szerkezetében reverzibilis változások (átmeneti destabilizáció) következnek be, amelyekben a pórusok keletkeznek.

Ez egy biztonságos eljárás, mivel nem károsítja a sejtmembránokat, és az ampullákban lévő anyagokat injektálja. Az elektroporáció és az ultrahang kombinált hatása növeli a mennyiséget, a mélységet és a hatóanyagok bőrbe juttatásának egyenletessége. Ez a módszer gyors és látható eredményeket garantál a ráncok és vonalak, pl. *orr- és szemöldökráncok*, "szarkalábak" csökkentésében, lifting kezeléseknél, a bőr színének és szerkezetének javításában. A kezelést 5-10 napos időközönként 4-6 kezelésből álló sorozatban végezzük.

Tú nélküli mezoterápia a cellulit és a zsírszövet elleni terápiában.

A mezoterápia hatással van a zsírszövetre, köszönhetően az impulzus erejének szabályozásának lehetőségének. A problémának megfelelő szérum, ampulla vagy koktél kiválasztásával elérjük a zsírszövet csökkenését, a striák és a cellulit elleni hatást. A kezelést 10-12 kezelésből álló sorozatban, heti 2-3 alkalommal végezzük, így a kezelés hatása *t o v á b b* tart. A cellulitisz csökken, a bőr fesesebbé és fesesebbé válik. A zsírcsökkentés a zsírsejtekbe behatoló anyagok révén érhető el.

INDIKÁCIÓK

- a bőr rugalmasságának csökkenése,
- ráncok megelőzése,
- cellulit (combok, has, fenék, karok),
- striák,
- hipertrófiás hegek.

ELLENJAVALLATOK:

- terhesség,
- fémbeültetések a szervezetben,
- szívbetegség,
- pacemaker,
- vénás betegség,
- epilepszia,
- bőr túlérzékenység, gyulladás.

GARANTÁLT HATÁSOK EGY SOR KEZELÉS UTÁN:

- jól látható emelési eredmények,
- a ráncok és barázdák csökkentése,
- a bőr tónusának és textúrájának javítása.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ARCKEZELÉSHEZ

Az arckezelést egy toll alakú fejjel végzik. A kezelés előtt ki kell zárni a következőket ellenjavallatok mind az ügyfél, mind a kezelést végző személy számára. A kezelés elvégzésekor a kezelést végző személy úgynevezett "zárt kört" hoz létre, ezért a kezét vagy ujját az ügyfél arcára kell helyezni.



LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Kapcsolja be a készüléket a fő tápegységre az O/I gombbal, Válassza ki az intenzitást a 8-as gombbal, Válassza ki a Hz típusát a 9
Nyomja meg a 27-es gombot a kezelés elindításához.

A PARAMÉTEREKET AZ ÜGYFÉL FELFOGÁSÁHOZ KELL IGAZÍTANI

Paraméter kiválasztása:

Intenzitás: 1-9 Frekvencia: 15-20 Hz


MEGJEGYZÉS!!!

A frekvencia változása akkor következik be, amikor az intenzitást 9-re növeljük, ha az ügyfél még mindig nem érzi a rövid elektromos impulzusokat.

A frekvenciaváltás előtt csökkentse az intenzitást 1-re. Kezelési idő 5-10 perc.

A kezelés előtt alaposan mossa és tisztítsa meg az arcát. Hűsítő gélt is alkalmazhat

A fejmozgások "O" vagy "Z" alakban történnek.

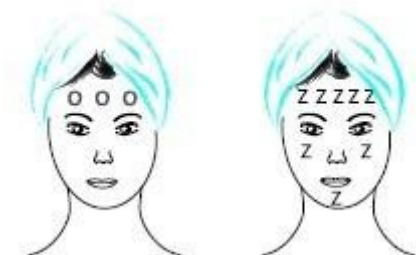

A mezoterápiás kezelést követően ultrahangot alkalmazunk, hogy az ampullákban lévő anyagokat mélyen a bőrbe nyomjuk.

TESTKEZELÉS VÉGREHAJTÁSA

A testkezelést egy fejjel végzik, amelybe ampullát, szérumot vagy koktélt helyeznek. A kezelés előtt ki kell zárni a testkezelések ellenjavallatait.



Szérum, ampulla, koktél alkalmazása a kezelőfejre:



LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Kapcsolja be a készüléket a fő tápegységre az O/I gombbal, Válassza ki az intenzitást a 8-as gombbal, Válassza ki a Hz típusát a 9 Nyomja meg a 27-es gombot a kezelés elindításához.

A PARAMÉTEREKET AZ ÜGYFÉL FELFOGÁSÁHOZ KELL IGAZÍTANI

Paraméter kiválasztása:

Intenzitás: 5-9 Gyakoriság: frekvencia: 30-60 Hz

MEGJEGYZÉS!!!


A frekvencia változása akkor következik be, amikor az intenzitást 9-re növeljük, ha az ügyfél még mindig nem érzi a rövid elektromos impulzusokat.

Csökkentse az intenzitást 1-re, mielőtt a frekvenciát megváltoztatná.


20-30 perc kezelési idő.

A fejmozgások csúszó vagy "O" alakban történnek.

Has:

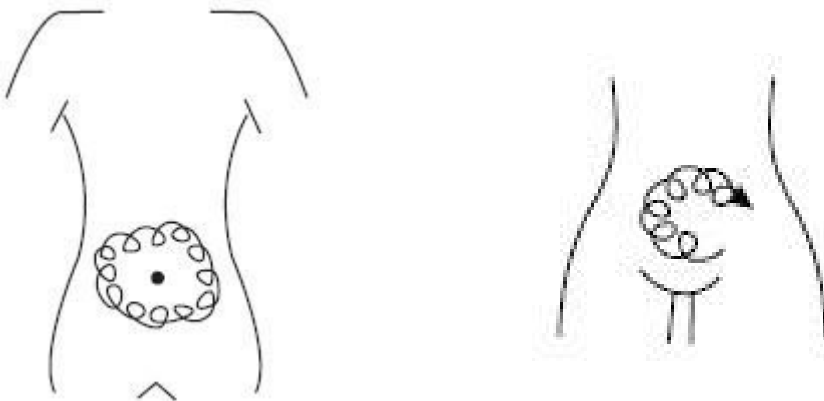

Alsó végtagok:

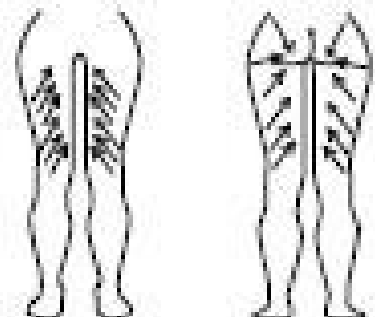

A mezoterápiás kezelést követően ultrahangot alkalmazunk, hogy az ampullákban lévő anyagokat mélyen a bőrbe nyomjuk.

ELEKTROKOAGULÁCIÓ

Ennél a módszernél a fehérjéket elektromos ívvel lefejezik. Fibrómák, szemölcsök kezelésére használják.

Az eljárás megkezdése előtt a bőrelváltozást helyesen kell diagnosztizálni, majd fertőtleníteni kell. Egy derékszögben tartott tű segítségével eltávolítják az elváltozást.

MEGJEGYZÉS: Az intenzitást az ügyfél érzéseinek megfelelően választjuk meg. Ha egészséges bőrön végzik, az érzések nagyon fájdalmasak.

Ellenjavallatok:

Cukorbetegség
Keringési zavarok,
véralvadási zavarok.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Kapcsolja be a készüléket a fő tápegységre az O/I gombbal, Válassza ki az intenzitást a 4 gombbal, A kezelés megkezdéséhez nyomja meg a 25. gombot.

VACUUM

Ez egy olyan kezelés, amely szívóerőt és a kezelési területhez megfelelően kiválasztott üvegbuborékokat használ. A kezelést száraz bőrön végzik az izmok lefolyását követően.

INDIKÁCIÓK:

mitesszerek,
kitágult pórusok,
érdes, bőrkeményedés, bőr
petyhüdtség,
striák,
a bőr szárazsága

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Kapcsolja be a készüléket a fő tápegységre az O/I gombbal, Helyezze a piros csövet a 21-es bemenetbe- válassza ki a megfelelő buborékot, A kezelés megkezdéséhez nyomja meg a 23-as gombot, A tárcsával állítsa be az intenzitást.

SPRAY

A bőr kíméletes tonizálására szolgál vákuummal és a benne található

tonikot tartalmazó tartály.

Tömlőcsatlakozás



LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Kapcsolja be a készüléket a fő tápegységre az O/I gombbal,

Helyezze be a fekete tömlőt a 21a bemenetbe,
Nyomja meg a 23-as gombot a kezelés
elindításához, A tárcsával állítsa be az
intenzitást.

Woodlámpa, kvarclámpa, amelynek sugárzási hossza 366 nanométer.

Ez a lámpa négy fénycsőből áll, amelyek egy üvegszűrőn keresztül ultraibolya sugarakat bocsátanak ki.
A fluoreszcenciajelenségek alapján diagnózist állíthatunk fel.

A bőr minden egyes pontját más-más tükröződés jellemzi:

normál bőr - kék-ibolya, száraz bőr -

halvány rózsaszín,

bőr jól hidratált sötétlila,

zsíros bőr, majdnem fekete színű.

A Wood lámpát használat előtt körülbelül 3 percig melegítik,

A vendég és a lámpa között körülbelül 20 centiméteres távolságot kell tartani.

VAPOZON

Az arc, a nyak, a váll, a dekoltázs és a hát, valamint a test egyéb részeinek párologtatására használt készülék.

A meleg víz és a gőz porustágító képességüknek köszönhetően felpuhítja az elhalt hámsejteket is - segít megtisztítani az arcbőrt.

MEGJEGYZÉS!!!

Csak forralt vizet vagy közvetlenül a csapvizet öntsön a vaponba!

Műszaki adatok:

Tápegység AC 220V,

frekvencia 50-60Hz,

teljesítmény 850 W,

Méret 104 x 61,5 x 43cm

Súly 36kg,

Szívóerő 63cmHg, kavitációs

hámzás 25-28 kHz

1 MHz-es ultrahang,

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék bekapcsolva van, de nem válaszol	1. Ellenőrizze, hogy a készülék fő része megfelelően csatlakozik-e az áramforráshoz. 2. Ellenőrizze, hogy a bekapcsológomb be van-e kapcsolva.
Gyenge szívás vagy nincs szívás	1. Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a tápegységhez. 2. Ellenőrizze, hogy a szűrő ki van-e tisztítva.

A főegység túlmelegszik működés közben	1. Ha a készüléket túl sokáig használták, kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a készülék magától lehűl. 2. Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelelő-e (ezt villanyszerelőnek kell ellenőriznie).
Nincs tápegység	Ellenőrizze a biztosítékot. Ha elhasználódott, cserélje ki.

TARTOZÉKOK LISTÁJA

NÉV	EGYSÉG	MENNYISÉG
Készülékbázis,	db	1
Mikrodermabráziós fejek,	db	9
Ultrahangos fej az arckezelésekhez,	db	1
Ultrahangos fej a szemkörnyék kezelésére,	db	1
Kígyó,	db	1
tartozék kavitációs	db	1
Meleg-hideg fej	db	1
Elektrokoagulációs fej	db	1
Mezoterápiás fej	db	2
VIO	db	1
VIO illeszték	db	3
Galvanizálás	db	1
Tápkábel,	Pcs.	1
Biztosítékok,	Pcs.	2
Utasítások,	példány	1
Garancia.	példány	1

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék szakképzett kozmetikus személyzet által történő működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. Ne szedje szét a készüléket, és ne próbálja azt más célra használni, mint a következőkre a jelen használati utasításban feltüntetettek szerint.
3. Ne telepítse vagy működtesse a készüléket nedves helyiségek közelében vagy nedves kézzel - hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe.
4. A következő esetekben húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a forgalmazó szervizosztályához! Ha: a. folyadék került a készülékbe,
b. a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat bocsát ki,
c. a tápkábel megsérült,
d. a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha befejezte a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának vagy akár leégésének veszélye.

Figyelem!

A tápkábel sérülése vagy egyéb hiba esetén forduljon a forgalmazó szervizosztályához!

Ez a berendezés nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (gyermekek), illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek által, kivéve, ha felügyelet mellett vagy a berendezés használati utasításának megfelelően használják.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A készülék újrahasznosítható vagy újra feldolgozható anyagokból készült, ezért megfelelő gyűjtőben kell elhelyezni!