


D-128 típusú ULTRAHANG készülék használati utasítása

Mielőtt a készüléket használatba venné figyelmesen olvassa el a kezelési utasítását!

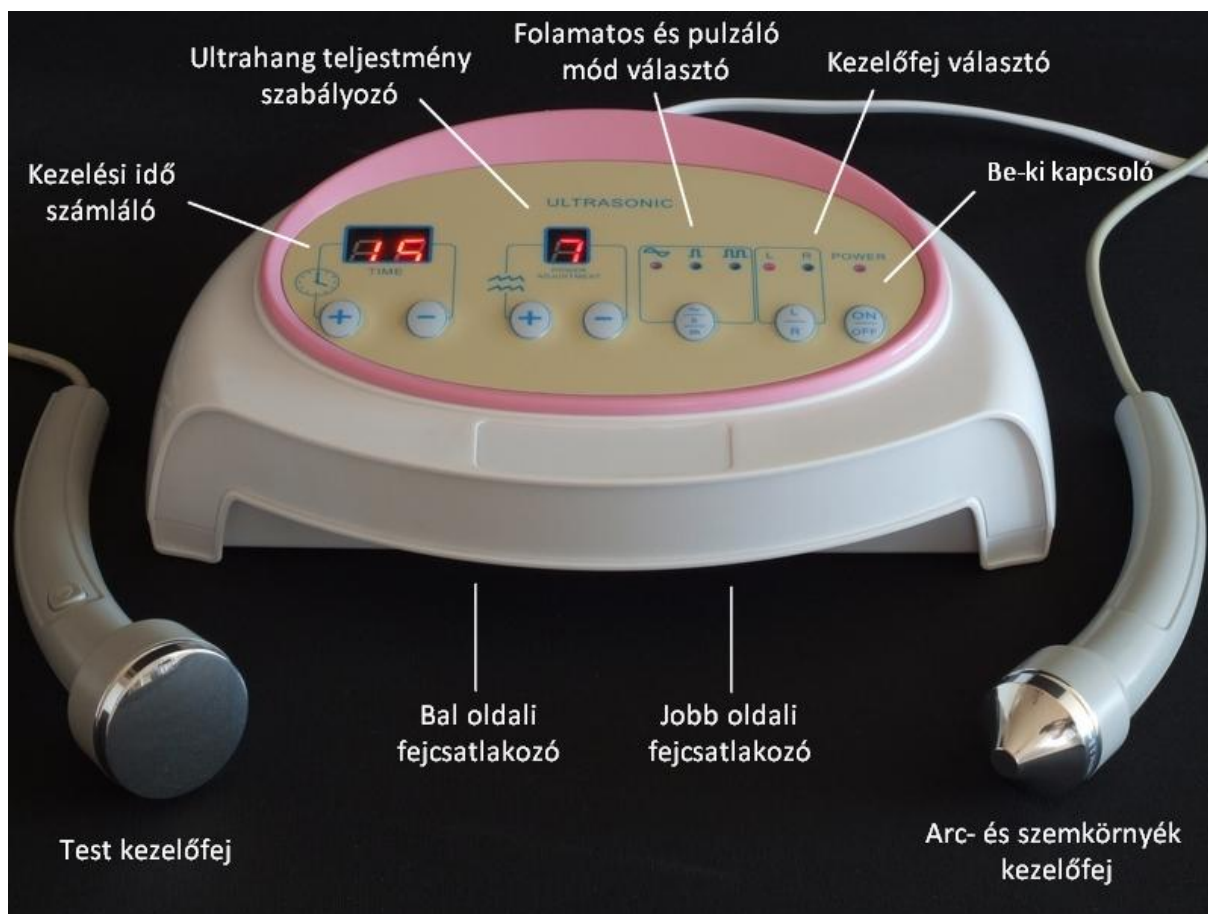

Beüzemelés, használat:

1. Csatlakoztassa a test kezelőfejet a bal oldali, az arc és szemkörnyék kezelőfejet a jobb oldali csatlakozó aljzatba. (Szemkörnyéken max. 3-as teljesítményfokozatot használjon!!!)
2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra, majd nyomja meg az ON/OFF gombot.
3. Válassza ki használni kívánt kezelőfejet.
4. Az Ultraszang teljesítmény szabályozót állítsa a kezeléshez szükséges értékre (1-8 fokozat)
5. A Mód választó gombbal válassza a folyamatos vagy a két pulzáló üzemmód valamelyikét.
6. Állítsa be a kezelési időt (1-30 perc)
7. A kezelőfejen található nyomógombot tartsa nyomva a kezelés ideje alatt.
8. A kezelés befejeztével kapcsolja ki a készüléket.

Importálja és forgalmazza:

ELKONcosmetic Kft.

H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.

Tel./fax:+36-28-472129

www.elkon.hu

elkon@elkon.hu

TANÚSÍTVÁNY

Az Importáló tanúsítja, hogy a D-128 típusú ULTRAHANG kozmetikai készülék megfelel az Európai Unióban érvényes- a villamos készülékekre vonatkozó biztonsági előírásoknak!

Az ultrahang

Az ultrahang a sejtekre és szövetszerkezetre kifejttet, sokrétű mechanikus, termikus és kémiai hatásának köszönhetően már régóta különböző módokon felhasználják orvosi és esztétikai célokra.

Az ultrahanghullámok **erős mechanikus hatást** fejtenek ki a biológiai struktúrákra. A hatást lényegében gyors nyomásváltozás idézi elő a szövetekben. Ezzel többek között gyorsíthatók

- a szövetekben lezajló diffúziós folyamatok,
- élénkíthető az anyagcsere,
- növelhető a membránok áteresztő képessége.

Az ilyen mikromasszázs aktiválhatja a fibroblasztokat, amelyeknek következménye a bőrszerkezet jelentős javulása, a bőr rugalmasságának fokozódása, valamint a kötőszövet feszségének növelése.

Kontraindikáció

A kontraindikációkat a kezelésnél szigorúan be kell tartani!

Ultrahangot nem szabad alkalmazni semmilyen testrészen, ha a páciens:

- rosszindulatú daganatos betegségben szenved vagy ennek gyanúja áll fenn.
- pacemakerre van.

Az alábbi testtájakon nem szabad alkalmazni:

- szem (szemgolyó)
- ivarmirigyek
- szív
- agy
- gerincvelő
- növekedési zónák
- az altest terhesség esetén.

Fontos figyelmeztetések:

1. Ne használja a készüléket erősen párás környezetben!
2. Tartsa távol gyúlékony anyagoktól!
3. Ne takarja le, biztosítsa természetes szellőzését!
5. Tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót, stb!
6. A hálózati vezeték sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon az ELKON Kft. szakszervizéhez (06-70-9492223)!

Jellemzők:

Mikroprocesszoros vezérlés

Kis méret és súly

Alacsony fogyasztás

Könnyű kezelhetőség

Műszaki adatok:

Ultrahang frekvencia: 1Mhz

Ultrahang teljesítmény: 2W/cm²

Hálózat: 230V 50-60Hz

Fogyasztás: 10W