

H2201 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK KEZELÉSI UTASÍTÁSA (ULTRAHANGOS PEELING v. SKINSCRUBBER)



●A készülék működési elve:

A magas frekvenciás rezgéseket az ultrahangos fej "pengéje" segítségével a bőr felületére vezetve, ott "sokkhatást" fejt ki ami alkalmas bőr megtisztítására. Tisztító kozmetikum vagy csak tiszta víz alkalmazásával hatékonyan lehet az elhalt hámréteget pattanásokat, akne-t eltávolítani, mélytisztítást végezni.

●Műszaki és technikai adatok:

Termék	Nagyfrekvenciás ultrahangos peeling
Modell szám:	H2201
Hálózati feszültség	85-265V AC
Hálózati frekvencia	50/60Hz
Teljesítményfelv.	20 W
Kimeneti frekvencia	>25000Hz
Méret(H*Sz*M)	38,4x23,5x11 cm
Súly:	Nett:1,8Kg Br:2,55Kg

●Tartozék lista:

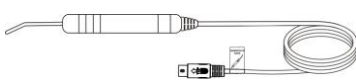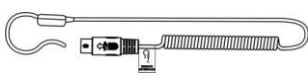
Megnevezése	Kép	db
Készülék		1
Hálózati kábel		1
Ultrahangos tisztító fej		1
Kontakt érzékelő elektróda		1
Használati utasítás		1

●A készülék ismertetése:




●Tartozék ismertetése:

1. Ultrahangos fej
2. Kontakt érzékelő elektróda
3. Ultrahangos fej csatlakozó
4. Kontakt érzékelő csatlakozó
5. Kontakt érzékelő vezetéke
6. Ultrahangos fej vezetéke


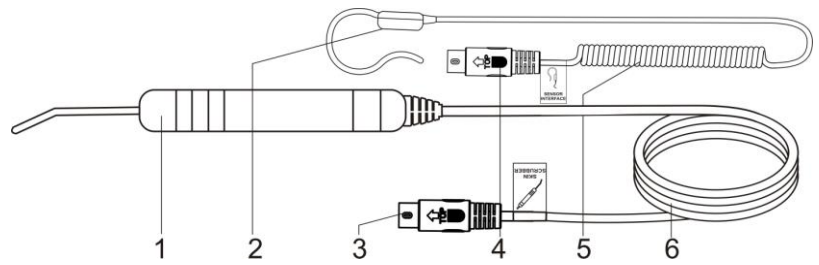


●Kezelő szervek ismertetése:

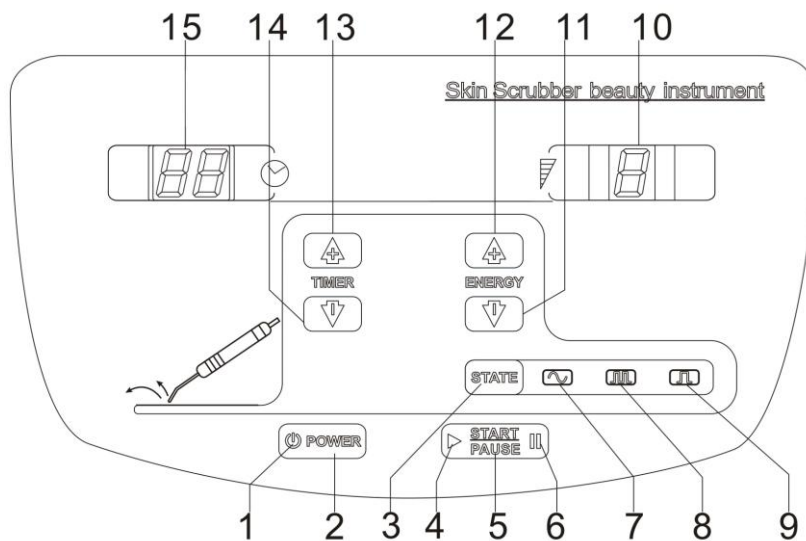

- | | | |
|--|--|---------------------------|
| 1. Tápellátás jelzőfénye | 2. Bekepcsoló gomb | 3. Üzem mód választó gomb |
| 4. Start jelzőfénye | 5. Start/Szünet gomb | 6. Szünet jelzőfény |
| 7. Folyamatos hullám jelzőfénye | 8. Hullámcsomag (1. modulált) jelzőfénye | |
| 9. Szakaszos hullám (2. modulált) jelzőfénye | 10. Teljesítmény kijelző | |
| 11. Teljesítményt csökkentő gomb | 12. Teljesítményt növelő gomb | |
| 13. Időzítést növelő gomb | 14. Időzítést csökkentő gomb | 15. Időzítés kijelző |


●Hátlap ismertetése:

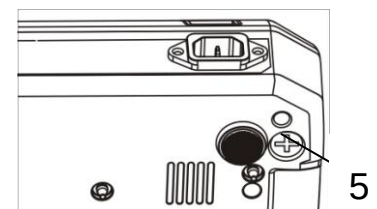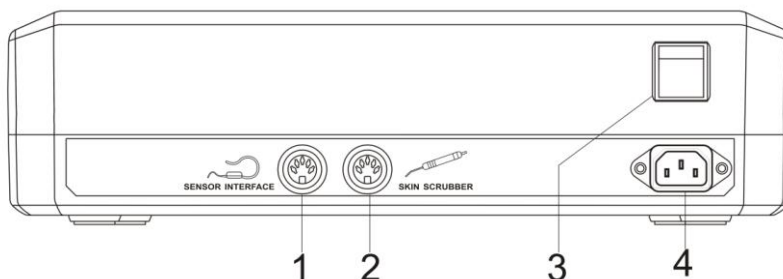

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. Kontakt érzékelő csatlakozó | 2. Ultrahangos fej csatlakozó | 3. Hálózati főkapcsoló |
| 4. Hálózati csatlakozó aljzat | 5. Hálózati biztosíték | |

•Tartékok csatlakoztatása, üzembe helyezés:

1. A készülék hátoldalán csatlakoztassa a hálózati kábelt, az ultrahangos fej és a kontaktus érzékelő dugóját a megfelelő aljzatokba az ábráknak megfelelően.

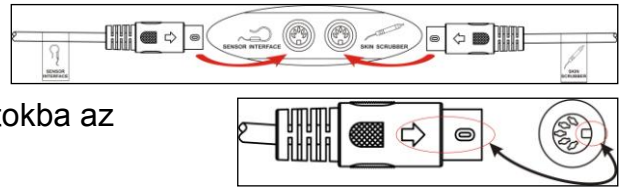

2. A hálózati főkapcsolóval kapcsolja be a készüléket, a kapcsoló világít.

Az előlapon nyomja meg a "POWER" gombot, a készenléti állapot jelző lámpa világít.

Készenléti állapot:

Időzítés Kijelző "15"; perc

Teljesítmény kijelző "1"; fokozat

Folyamatos üzemmód lámpa " " világít.

A Start/Szünet gomb job oldalán a szünet lámpa " " világít.

3. Üzem mód beállítás a készenléti állapothoz:

Időzítés beállítása: nyomja meg a " " és " " gombokat kívánt kezelési idő beállításához, 1-30 percre lehetséges.

Teljesítmény beállítása: nyomja meg a " " és " " gombokat kívánt teljesítmény kiválasztásához, 1-9 -ig lehetséges.

Hullámforma kiválasztása: Nyomja meg többször a "STATE" gombot a kívánt hullámforma kiválasztásához.



Lámpa világít: folyamatos a hullámforma



Lámpa világít: hullámcsomag (1. modulált)



Lámpa világít: szakaszos hullámforma (2. modulált)

A Start/szünet gombbal indíthatja, vagy szüneteltetheti a működést.

Indításkor a " " lámpa világít, szüneteltetésre a " " lámpa világít.

•Gyors beállítási funkció:

Beállítás: készenléti állapotban (stand-by) nyomja meg a "POWER" gombot, hogy ezzel

kikapcsolja a kezelőfelületen az összes kijelzést. Nyomja meg a "START PAUSE" gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a teljesítménybeállítás menübe.

A teljesítmény “ ” “” gombokkal beállítása után (1-9 fokozat) 5 másod perc múlva a készülék automatikusan elmenti a beállítást.

●Bőrtisztítás:

1. Tiszta vízzel permetezze be bőrt, hogy felpúhuljon.
2. Vendége csuklójára helyezze fel a kontaktus érzékelő elektródát
3. Az ENERGY gombbal állítsa be a szükséges teljesítményt.
4. A bőr felületét egyenletesen vonja be megfelelő bőrápoló termékkel (pl. tisztító tej, stb.), a művelet teljes ideje alatt tartsa nedvesen a bőrt.
5. A kezelések bemutatása A.B.C.D. ábra.

A, Akne fájdalommentes megszüntetése (A ábra). Az ultrahangos rezgés eltávolítja az érettebb pattanásokat is, ami szintén fájdalommentes.

B, Kinövés tisztítás (A ábra)


A 25.000Hz-es rezgésű nagyon gyorsan képes kitisztítani a bőr pórusában megrekedt szennyeződések és a kozmetikumok maradványait.

C, Bőrtisztítás (A, C ábra)

El kell távolítani az előregedett bőrt és a szennyeződések.


D, Beviteli masszázs (D ábra)

Helyezze a fej lemezét párhuzamosan a bőrfelszínnel, így a bőrre előzőleg felvitt hatóanyagot a fej “ütögető” mozgása hatékonyan bejuttatja a bőrbe. (D ábra)

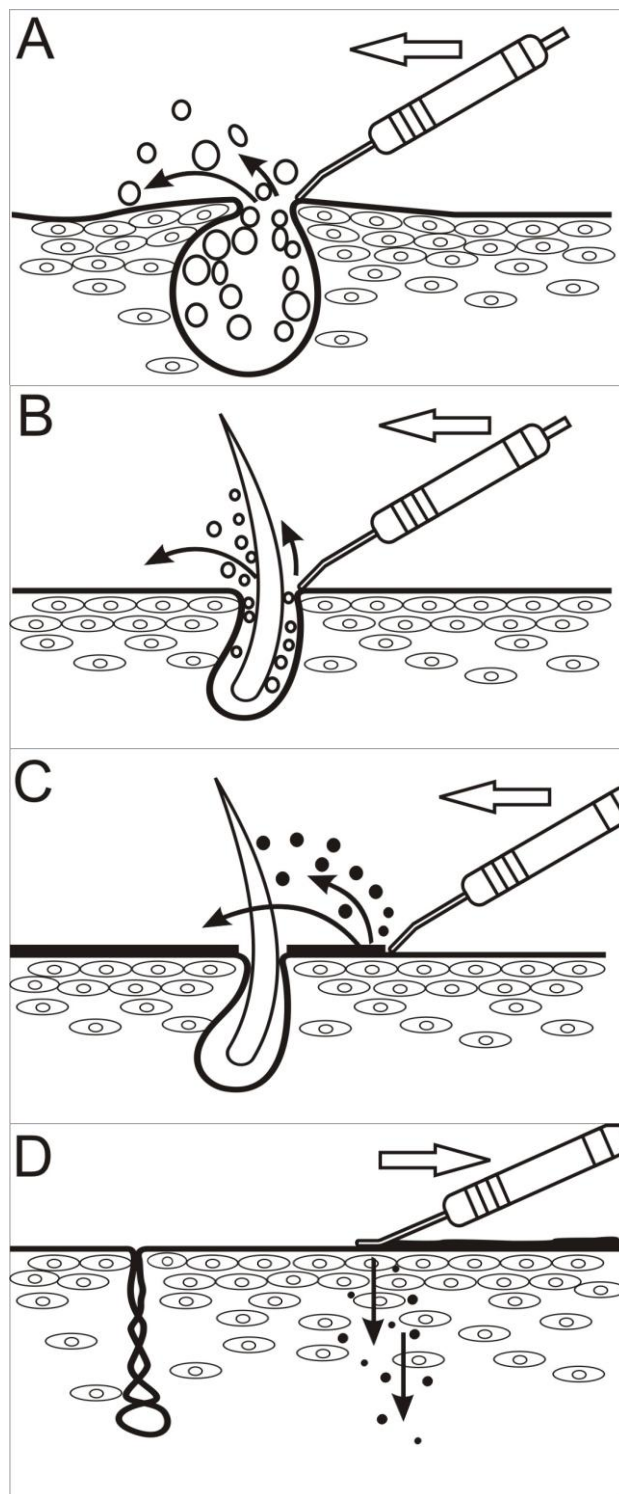

●Figyelem:

1. Ne felejtse el a vendége csuklójára felhelyezni a kontaktus érzékelő elektródát, mert különben a készülék nem működik.
2. A kezelő fejet a bőr felületén ne hagyja sokáig egy helyben, hanem állandóan tartsa mozgásban.
3. Tisztítási művelet közben igyekezzen a kezelő fej pengéjét a bőrfelületre mindig 45 fokos szögben tartani. (ábra szerint)
4. Kezelés közben mindig tartsa nedvesen a bőr felületét.
5. Masszírozó művelet közben a kezelőfejet igyekezzen a bőrfelületre 20 fokos szögben tartani. (ábra szerint)
6. Ügyeljen a csatlakozó vezetékek épségére, sérülésük esetén ne használja.
7. Az ultrahangos tisztító fej sérülékeny, ezért tartsa biztonságos helyen és minden kezelés után tisztítsa meg. Ne helyezze vízbe, tartsa szárazon.
8. A kontaktus érzékelő elektródát hasonló módon tartsa tisztán.
9. Amennyiben a készülék vagy tartozékai megsérülnek, ne használja tovább hanem juttassa el szakszervizbe.
10. A kezelőfej „pengéjének” deformálódása esetén a vendégének sérülést okozhat.
11. A napi munka befejeztével a készüléket a hátoldalán lévő kapcsolóval áramtalanítsa.
12. Ne használja páradús környezetben (pl. fürdőszoba)

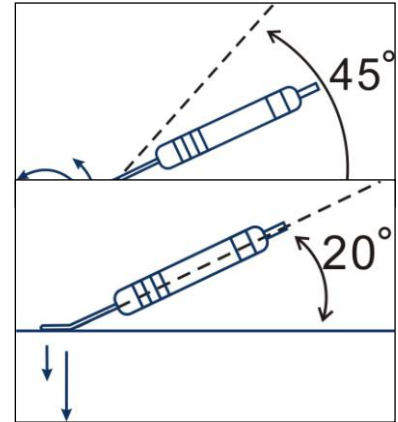

- TILOS a készüléket letakarni, oldószerrel vagy agresszív anyaggal tisztítani, tűz- és robbanásveszélyes anyagok közelében üzemeltetni, burkolatát megbontani és benne átalakítást végezni!**

A készüléket importálja és forgalmazza:

ELKONcosmetic Kft. H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.

Telefon/fax: (36)-28-472 129 www.elkon.hu elkon@elkon.hu

●**Ellenőrizze az alábbiakat hiba esetén:**

S/N	Hibajelenség	Oka	Megoldás	Teendő
1	Főkacsoló hátoldalon be van akpcsolva, lámpa nem világít, "POWER" gomb nem működik.	A készülék nem kap áramot.	1. Ellenőrizze, hogy a hálózathoz csatlakoztatta-e 2. Ellenőrizze a készülék biztosítékát.	1. Húzza ki a hál. dugót majd csatlakoztassa újra a hálózathoz 2. Cseréljen biztosítékot
2	Hálózati kapcsoló be van kapcsolva, a jelző lámpa világít, de akészülék nem működik.	Hálózattal nem érintkezik.	1. Ellenőrizze a hálózati vezeték csatlakozását. 2. Ellenőrizze és Cserélje ki a biztosítékot.	1. Ha rossz a kontaktus csatlakoztassa újra a hálózati vezetékét. 2. A biztosíték csere után sem működik keresse fel a szervizt.
3	A készülék elindul de a fej nem működik, az időzítő kijelzője "E1"-et mutat és folyamatosan villog .	A tartozékok nem megfelelő aljzatba vannak csatlakoztatva	1. Ellenőrizze a fej helyes csatlakoztatását. 2. Ellenőrizze a kontaktus érzékelő csatlakoztatását is. 3. Ellenőrizze a tartozékok vezetékeinek épségét.	1. Csatlakoztassa helyesen a tartozékokat. 2. Nedvesített szövetet helyezzen a kontakt érzékelője és a vendég keze közé a jobb kontaktus végett. 3. Forduljon szakszervizhez.
4	A készülék elindul a fej nem működik, az időzítő kijelző "E2"-t mutat és villog.	A készülék a fej hibáját jelzi.	1. Ellenőrizze a fej helyes csatlakozását	1. A fej csatlakozóját húzza ki majd csatlakoztassa újra. 2. Forduljon szakszervizhez.

Biztosíték cseréje:

Húzza ki a hálózati csatlakozó vezetékét. Csavarhúzóval csavarja ki a készülék alján található biztosítéktartót (ábra). Cserélje ki a 250V/4A-értékű biztosítékot.

