

3 in 1 Mikrodermabráziós készülék

(Ultrahang, gyémántfejes csiszoló, hideg-meleg vasaló)



Fontos megjegyzés:

- 1) Kérjük olvassa el a használati utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket.
- 2) Ne tartson folyadékot a készülék közelében, legyen körültekintő az elektromos csatlakozásokkal.
- 3) Ne használja terhes nőkön, epilepsziás betegeken!
- 4) Tilos megbontani a készülék burkolatát, csak szakember javíthatja a készüléket.
- 5) Tartsa tisztán a készüléket és sterilizálja és a kezelőfejeket minden kezelés után.

1, Hatásai:

Ez a legnépszerűbb kombináció gyémántfejes mikrodermabrázióval , hideg-meleg vasalóval és ultrahanggal.

Gyémántfejes mikrodermabrázió

Gyémántfejes mikrodermabrázió az egyik hatékony formája a mechanikai hámlasztásnak , az elhalt hámsejtek eltávolításának. A cserélhető fejek a finom fém részecskéknek feladata a hámlasztás. Előre hátra kell mozgatni a bőr felületén. A mikrodermabráziót lehet alkalmazni önálló kezelésként, vagy

kiegészítő arckezelésnek.

A mikrodermabrázió kiválóan alkalmazható a következő esetekben:

Napkárosított, ráncos bőrön, akne és heges bőrön a hegek csökkentésére, a felesleges zsírosodás megszüntetésére, miteszerek és nyitott pórusok kezelésére, öregségi foltokra , striákra és stresszes bőrön... Stb...

A mikrodermabrázió alkalmazható az arcon , nyakon, dekoltázson és az egész testen. Rendszeres kezelést követően a bőr visszanyeri fiatalos egészséges megjelenését .

Ultrahang

Másnéven ultrahangos masszázs vagy ultrahangos terápia, az 1980-as években lett népszerű a szépségápolás területén a gyors hatása nagy gyógyulási és sikeres kezelési arány, egyszerű használhatósága miatt.

Három fő hatása:

Mechanikai hatása: az egy millió másodpercenkénti mechanikus rezgés végzi a “masszázszt” javítja a sejtek anyagcseréjét, a vérkeringést valamint serkenti a sejtek és a bőrszövetek tápanyagellátását, rugalmasságát.


Melegítő hatása: javítja a vérkeringést, ellazítja az izmokat, nyugtatja az idegeket és javítja az anyagcserét.

Kémiai hatása: az ultrahang hullám stimuláló és anyagcsere fokozó tulajdonságú, valamint a szervezetre gyakorolt lúgosító hatása is ismert. Az ultrahang fokozza a méreganyagok eltávolítását.


Hideg és meleg vasaló: a meleg funkció megnyitja a pórusokat, ezzel könnyebbé válik a hatóanyagok bejuttatása, a meleg funkció pedig bezárja azokat.

Kezelőszervek

1) Előlap

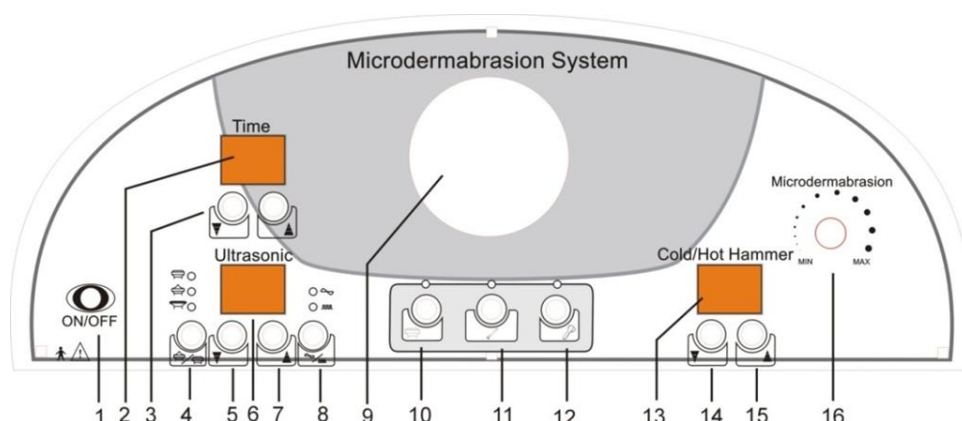


1. BE/KI kapcsoló
2. Kezelési Időt kijelző
3. Kezelési idő szabályzó
4. Ultrahang kimenet választó
5. Ultrahang intenzitás szabályzó (le)
6. Ultrahang intenzitás kijelző
7. Ultrahang intenzitás szabályzó (fel)
8. Ultrahang jelforma választó
9. Vákuum mérő kijelző
10. Ultrahang választó
11. Mikrodermabráció választó
12. Hideg-meleg vasaló választó
13. Hideg-meleg vasaló intenzitás kijelző
14. Hideg-meleg Vasaló intenzitás szabályzó (le)
15. Hideg-meleg Vasaló intenzitás szabályzó (fel)
16. Vacuum szívóerő szabályzó

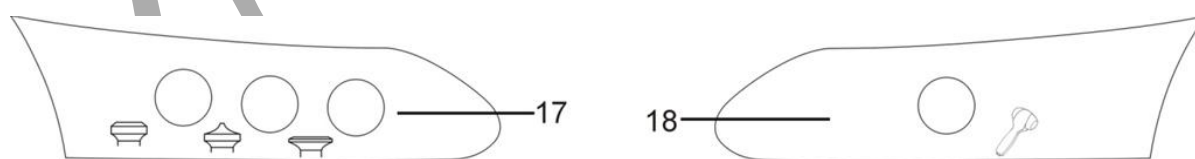

17. Ultrahang kezelőfej csatlakozó kimenetek
18. Hideg-meleg vasaló csatlakozó kimenet

Mikrodermabrázió üzembe helyezése

Nyel

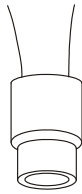

Helyezze a szűrőt a fejbe majd utána a fémrácsot

Tömítő gyűrű



Csavarja a fejet nyélre.

Szűrő



Fej



Csatlakoztassa a fehér csövet a nyélre.



Csavarja le a képen látható rögzítő csavart és helyezze a csőre



Csatlakoztassa a csövet a szűrő tartályra és csavarja vissza a rögzítő csavart.

Ezzel üzembe helyezte a Mikrodermabráziót.

Ultrahang üzembe helyezése



Csatlakoztassa a kétérintkezős fehér kábel egyik végét a kezelőfejhez a másik végét a készülékhez.

2) Hideg-meleg vasaló üzembehelyezése



Csatlakoztassa a négyérintkezős fehér kábel egyik végét a kezelőfejhez, a másik végét a készülékhez.

3, Javasolt műveletek

Gyémántfejes Mikrodermabrázió

Helyezze áram alá a készüléket, majd nyomja meg az "1" gombot, hogy bekapcsolja a készüléket. Nyomja meg a "11" gombot, hogy elindítsa a Mikrodermabrázió funkciót.

Fordítsa el a "16" forgató gombot a vákuum szívóerő beállításához.

*Végezzen szívóerő próbát a kezén mielőtt a megkezdje a kezelést az arcon.

*Ne használja folyamatosan ugyanazon a területen a fejet 15 másodpercnél tovább

Állítsa az időzítést 15 percre

*Kezelés után tisztítsa a fejet fiziológiás sóoldattal.

Ultrahang

Helyezze áram alá a készüléket, majd nyomja meg az "1" gombot, hogy bekapcsolja a készüléket. Nyomja meg a "10" gombot, hogy elindítsa az Ultrahang funkciót.

Nyomja meg a "4" gombot a megfelelő kezelőfej kiválasztásához (Nagy kezelőfej a testhez, a közepes kezelőfej az archoz, a kis kezelőfej a szemkörnyék kezeléséhez ajánlott) és az "5" és "7" gombokat a megfelelő intenzitás beállításához (intenzitás szint 1-5-ig ajánlott) és nyomja meg a "8" gombot a jelforma kiválasztásához.

*Állítsa be a megfelelő intenzitást mielőtt a kezelést megkezdi a bőrön.

*Ne használja folyamatosan ugyan azon a területen a fejet 15 másodpercnél tovább

Állítsa az időzítőt 15 percre

Hideg-meleg vasaló

Helyezze áram alá a készüléket, majd nyomja meg az "1" gombot, hogy bekapcsolja a készüléket. Nyomja meg a "12" gombot, hogy elindítsa a Hideg-meleg vasaló funkciót.

Nyomja meg a "14" vagy "15" gombokat az intenzitás beállításához (8-as szint ajánlott).

Készlet tartalma

Név	Egység	Mennyiség	Megjegyzés
Készülék	db	1	
Hideg-meleg vasaló	db	1	
Vasalóhoz kábel	db	1	
Mikrodermabrázió fejek	készlet	1	3 nyél és 9 fej
Mikrodermabrázió cső	db	1	
Szűrő	db	30	
Tömítő gyűrű	db	10	
Ultrahang kezelőfej	készlet	1	3 méret
Ultrahanghoz kábel	db	3	arc,test,szemkörny.
Biztosíték és hálózati kábel	db	1+1	
Leírás	db	1	

Specifikációk

Feszültség 220-240V

Frekvencia 50HZ

Csomagolás 56*43*27 CM