

DERMA ROLLER

A bőrproblémák hatékony kezeléséhez 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm-es tűhosszal kell végezni a kezelést, mivel a bőrproblémákat 0,5-2mm-es mélységben lehet igazán hatékonyan kezelni. Emellett a megfelelően megválasztott steril hatóanyagot is a megfelelő mélységbe kell juttatni, közvetlenül a problémás sejtekhez.

A **derma rolleres kezelés** látszatra egyszerű, akár otthon is végezhető kezelésnek tűnhet, viszont 0,5mm feletti tűhossz felett otthoni alkalmazása veszélyes lehet, mivel a fertőzés kockázata mellett, a megfelelő **derma roller** tűméret, illetve a **derma roller** hatóanyagok helyes kiválasztása és alkalmazása miatt kizárólag kozmetikus, vagy orvos végezheti. Cégünk csak 0,5mm-1mm-1,5mm-2,0mm tűhosszúságban kínál dermarollereket normál és keskeny kivitelben.

Mi a Derma Roller, vagy más néven kollagén indukciós kezelés?



A derma rolleres kezelés két hatást fejt ki egyszerre, melyek egymást segítve látványos és tartós végeredményt produkálnak.

1. Kollagén termelés

A kollagén a bőr kötőszövetének egyik legfontosabb összetevője, mivel a kollagénnak köszönhető a bőr rugalmassága. A szervezetünkben található kollagén vízmegkötő képessége fokozatosan csökken a kor előrehaladtával, így bőrünk elveszti rugalmasságát és ráncok jelennek meg.

Bár nincs külső látható jele károsodásnak, az eljárás során a kis mikrotűk sok apró sebet ejtenek a bőrben. Ez nem látható és nem érezhető, mivel a „károsodás” nagyon apró. A seb parányi természete ellenére a test azon van, hogy meggyógyítsa magát a maga természetes módján. A test kollagént és elasztint kezd termelni – ez a két fő kulcsfontosságú építőeleme a bőrnek. Mivel nem történt meg a már meglévő „öreg” kollagén eltávolítása vagy „tényleges károsítása”, a létrejövő új kollagén formációk hozzáadódnak a meglévő kollagén szintekhez.

A beindított kollagén képző folyamat természetes, így a kezelés befejezése után is még hónapokig fejti ki hatását.

A kollagén képződése egyénfüggő. Függ a kortól, a tű hosszától, az étrendtől és az általános állapottól.

Ami biztos, hogy a kezelés végén látható eredményt fog tapasztalni.

2. Hatóanyagok bejuttatása kellő mélységbe, közvetlenül a problémás sejtekhez.

A Derma Roller kezelés egy új, hatékony eljárás a bőrön keresztül történő hatóanyag bejuttatásra.

A bőr feladata, hogy megvédje testünket a külső behatásokkal szemben, ezért a külsőleg használt krémek hatóanyagait sem engedi felszívódni, így csak kis mértékben jutnak be a kellő mélységbe, ahol látványos eredményt tudnának produkálni.

A bőr megszúrása átmenetileg áttöri ezt a védőréteget, és levetővé teszi nagy mennyiségű hatóanyag bejuttatását, a kellő mélységbe, közvetlenül az adott bőrproblémáért felelős sejtekhez. A mikrotűk által steril csatornák képeződnek, melyeken keresztül a kezeléshez kívánt steril hatóanyagokat bejuttathatjuk a kellő mélységbe, ahol aztán látványos és tartós eredmény produkálva fejtik ki hatásukat. Ezek a mikrocsatornák egy órán belül spontán bezáródnak.

A helyesen megválasztott hatóanyagokkal látványos és tartós eredmény érhető el.

Minőségi és kedvező árfekvésű kezdőkészlet vásárlásakor ingyenes tanfolyamot biztosítunk, így elsajátítható a szakszerű mezo hatóanyag ampullák kiválasztása és alkalmazása.

Látványos és tartós eredmény érhetünk el az alábbi területeken: bőrfiatalítás, hegek kezelése, narancsbőr, stria, májfoltok, depigmentációs és egyéb bőrhibák javítása.

Nagy előnye, hogy semmilyen káros mellékhatása nincs, minimális fájdalommal jár.

A Derma Rollerek sikeresen használhatók:

aknék, hegek és
műtéti hegek
kezelésére

mély ráncok
eltüntetésére,
halványítására
striák (terhességi,
elhízási csíkok)
eltüntetésére

cellulit
csökkentésére

atrófiás hegek kezelésére

száraz bőr kezelése

megereszkedett, petyhüdt bőr kezelésére az egész testen


ráncok (különösen a száj körül és szarkalábaknál)

tág pórusok kezelésére

bőrfeszítés, lifting kezelésre

bárányhimlő után visszamaradt kis besüppedésekre

pigment hiányosságnál (hipo pigmentáció) melynek eredménye hegesezés
öregési foltok

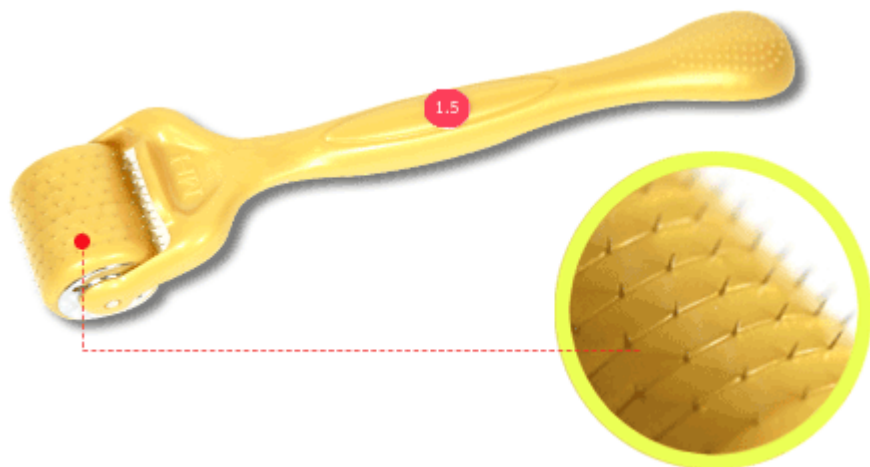

A Derma Roller kezelés előnyei:

Nincs ismert mellékhatása

Látható/érzékelhető javulás a kezelést követő pár napon belül, már az első kezelés alkalmával.

Költséghatékony (a lézeres kezeléstől eltérően nem igényel nagy befektetést)

Nincs ismert mellékhatása vagy napfény érzékenység a kezelés után

Rövid gyógyulási idő (fél-egy nap)

Nincs maradandó sérülés vagy heg

Nincs zúzódás, fertőzés, elszíneződés vagy egyéb komplikáció

A hatóanyagokat nagy mennyiségben a kellő mélységbe juttathatjuk

Minden bőrtípuson alkalmazható a kezelés (kivéve vadhús, lupusz eritematózus, stb.)

Vastagabb irharéteg hozható létre a felhám károsítása vagy eltávolítása nélkül

Miért válasszon minket és az MT Dermarollert?



Hazánkban egyre többen kínálnak derma rollert. Rajtunk kívül csak 1-2 cég mondhatja magáról, hogy a technológiáról és a felhasznált hatóanyagokról több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, mivel egy új eljárásról van szó.

Saját referenciaszalonunk több, mint 4 éve nap, mint nap végez a derma rolleres kezeléshez hasonló tűs mezo kezeléseket,

így több ezer kezelést végezve kijelenthetjük, hogy rendkívül nagy tapasztalattal rendelkezünk az adott bőrprobléma hatékony kezeléséhez szükséges hatóanyagkomplex kiválasztásában, illetve az esetlegesen kialakult hegek szakszerű kezelésében.

Keresse bátran szakképzett kolléganőinket, szívesen segítenek bármely kérdésben.

A dermaroller kedvező áron megvásárolható, így minden kozmetikus számára elérhető. Kozmetikai készülékekhez képest, rendkívül alacsony befektetést igényel, emellett több, eddig csak bőrgyógyászatiilag kezelhető bőrproblémát lehetséges a dermarollerrel kozmetikailag kezelni.

Rendkívül könnyen elsajátítható, az oldalunkon található részletes használati útmutató segítségével biztonsággal végezhető.


Előnyeink:

- Minőségi dermarollerek kedvező áron raktárról,
 - Steril mezo hatóanyag ampullák kedvező áron raktárról
 - Ingyenes tanfolyam kezdőkészlet vásárlásakor,
 - Részletes használati utasítás, képekkel.
- (weboldalunkon jelent meg elsőként hazánkban részletes dermaroller használati utasítás)

Derma Rollereinket és hatóanyagainkat is a legkedvezőbb árfekvésben tudjuk kínálni, köszönhetően a közvetlen gyári beszerzésnek és cégfilozófiánknek.

Sok orvosi tanulmány kimutatta, hogy a bőr Dermalrolleres kezelése hatékonyabb, illetve legalább olyan hatásos, mint a lézeres felszín átalakítás, kémiai hámlasztás vagy a mikrodermabrázió.

Emellett a dermaroller kedvező áron elérhető, a lézeres készülékek árához képest nagyságrendekkel kisebb beruházást igényel.

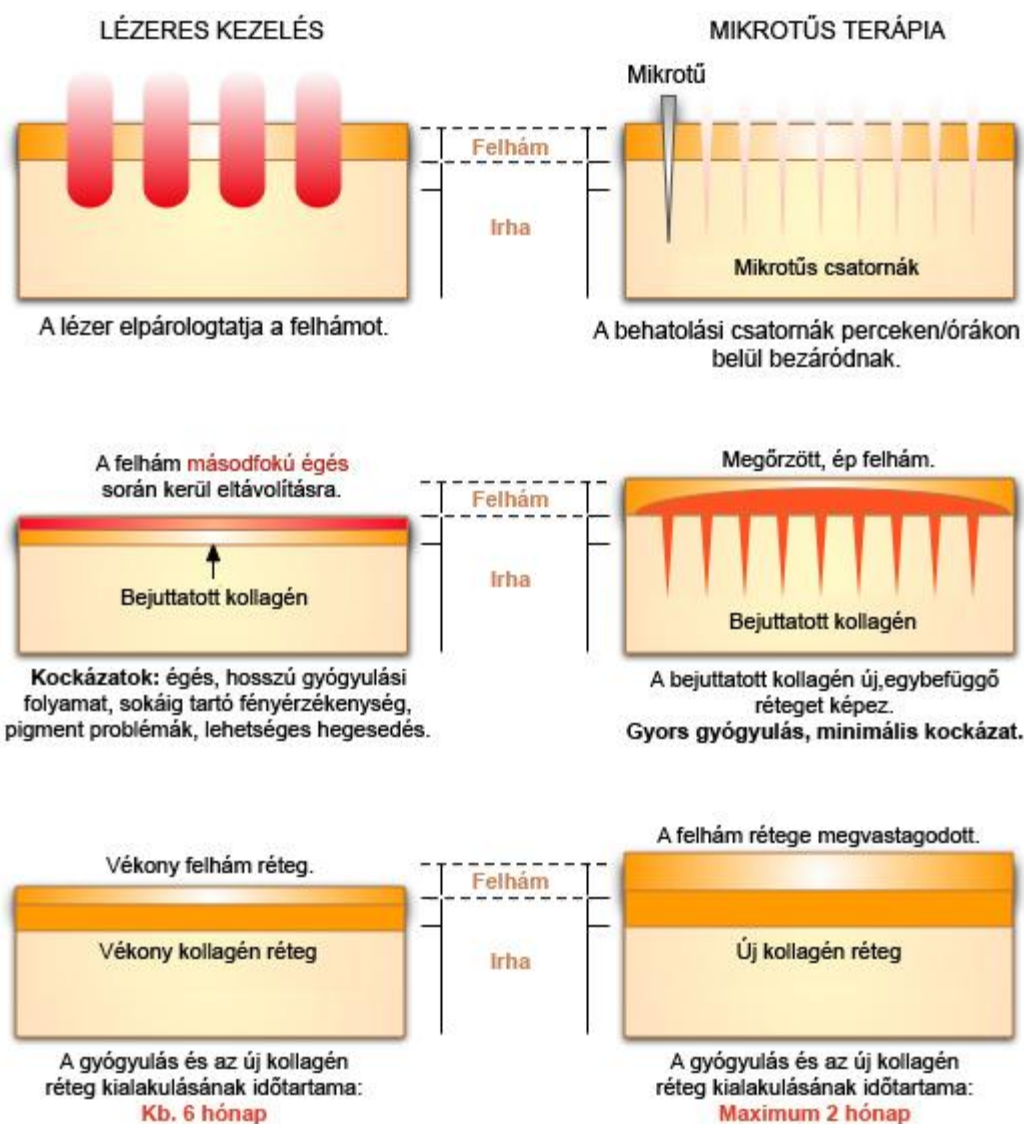

Hány kezelés szükséges?

Ez természetesen az adott bőrproblémától és az immunrendszer állapotától is függ.

A dermaroller 1-3 alkalmazását követően már látványos javulásról számolnak be a páciensek, de az igazi eredményre 2-3 hónapos kezeléssor után várható.

Amennyiben szükség van második kúrára is, akkor minimum 1-2 hónapot várni kell.

A dermarolleres kezelés után kb. 1-4 hónapot kell várni a végleges eredmény kialakulásához, de pácienseink már az első pár nap után látványos javulásról számolnak be.

Derma Rolleres kezelés utóhatásai

A dermaroller kezelés után a leégéshez hasonló bőrpír jelentkezhet, mely a bőr regenerációs képességétől függően 1-3 napon belül általában teljesen elmúlik. Rendkívül érzékeny bőrűek esetében 1-2 napig tartó kisebb véraláfutások is jelentkezhetnek.

A kollagén kezelés után 6-8 hétig belül kerülni kell az erős napsugárzást.

A bőrt a kezelést követő hetekben min. 20 faktorú napvédő krémmel védeni kell az erős napfény ellen, napozás, szoláriumozás nem ajánlott.

A Derma Roller használata nem javasolt a következő esetekben:

aktív bőrfertőzés, pattanás, ekcéma stb.
herpesz
anyajegy
krónikus bőrbetegség
véralvadási problémák
gyenge gyógyulási képesség
rosszindulatú bőrelváltozások
aktív akne
ekcéma
arcpír (Rosacea)
pikkelysömör
komoly solar keratosis (Tartós napfényhatásra kialakuló, érdes tapintatú, elmosódott szélű foltok)
kiemelkedő anyajegy, szemölcs
keloid képződésre való hajlam
terhesség és szoptatás
kezelést megelőző fél éven belüli gyümölcssavas hámlasztás
érzéstelenítő krémmel szembeni allergia (lidokain érzékenység)
különböző gyógyszerek pl. roacutan, vérhígító, illetve véralvadásgátló szerek, továbbá
aszpirin és aszpirin tartalmú gyógyszerek szedésekor
cukorbetegség



540 tűs vagy a 200 tűs dermaroller a jobb?

Ez a kérdés jogosan merül fel, de még nemzetközi szinten is megoszlanak a vélemények.

540 tűs mellett szól, hogy rövidebb ideig tart a kezelés

540 tűs dermaroller ellenvélemény:

- a túl sok tűszúrás egy időben túlzott traumát okoz a bőben
- túlzottan kell nyomni, ami az arckezelés esetében a vékony bőrréteg miatt nem előnyös

Egy biztos, nemzetközi szinten még mindig elterjedtebbek a 192-200 tűs dermarollerek. Viszont mára a régebben még lényegesen drágább 540 tűs rollerek is a 200 tűs rollerek árszintjére süllyedtek.

Sokan vannak akik az 540 tűs rollereket azért kedvelik, mert kevésbé találják fájdalmasnak a kezelést a páciensek.

Ez azért lehetséges, mert az 540 tűs dermaroller tűi nem hatolnak be a kellő mélységbe. Egyszerű fizikai magyarázata van, gondoljunk a fakir effektusra. Ha egy fakír sok szögre fekszik fel, nem szúrja át a testét, ha egy szögre próbálna felfeküdni bizony átszúrná.

Ha a 540 tűs dermarollert ugyanolyan erővel nyomjuk a bőrre, mint a 200 tűs szoktuk, bizony az 540 tűs tűi nem fognak behatolni a kellő mélységbe. Tehát erősebben kell rányomnunk, a tűk számának megfelelően kb. 2-szer erősebben. Azért nem 2,5-szer erősebben, mert a tűk picit vékonyabbak.

Amennyiben az 540 tűs roller tűi kellőképpen behatolnak a bőre, minimum ugyanolyan fájdalmat kell, hogy okozzanak, mint a 200 tűs, de inkább magasabb a fájdalomérzet.

A Derma Roller kezelés története

A mikro tűs technológiát 1995-ben fedezte fel Dr. Orentreich, majd 1998-ban Dr. Desmond Fernandes bemutatott egy kis tűs, bélyegző-szerű eszközt, mellyel kollagént juttatott be és általános esztétikai kezelésekhez használta.

2000-ben a német Dermaroller S.a.r.l bemutatta a Mesoroller sorozatát, ezzel a mikro tűs henger kezdett egyre inkább elterjedni és ismertté válni.

2004-ben a Clinical resolution laboratory bemutatta az MTS Roller-t.

Ahogy egyre népszerűbbé vált, egyre több és több cég fejlesztette ki saját dermarollerét, különböző kinézettel.



Létezik cserélhető fejes, rezgőfejes görgős henger, ezen kívül az eredetihez hasonló tűs bélyegző. A tűs henger a legideálisabb az eljáráshoz, mivel használatával precízen meghatározott távolságban ejtjük a szúrásokat. Ezt igazolja az is, hogy világszerte ezen eszközöket alkalmazzák.