

Nyomásterápiás készülék AUT 6014

Az **AUT-6014** nyomásterápiás készülék 8 légkamrával rendelkezik, tartozékai a teljes testet befedik. A légzsákokban létrehozott túlnyomással kezeli az egész testet, vagy egyes részeit, s ezáltal javítja a vérkeringést, a nyirokkeringést, így a test gyorsabban bontja le a zsírokat.


A nyomásterápia, más néven nyirokmasszázs célja, hogy a nyirokrendszer zavarai következtében a szövetekben felgyülemlett vizet, méreganyagokat eltávolítsák, megszüntessék a duzzanatokat és fokozzák a keringést. A kezelés a sűrített levegő általi masszázson alapul. A kezelendő végtag vagy annak egy része egy minden mérethez megfelelő kétfalú csizmába és övbe kerül, ezek elkülönülő pneumatikus kamrákra osztottak, amelyekbe levegőt pumpál a készülék, ezáltal stimulálja a vénás- és nyirokkeringést. A nyirokdrenázs olyan speciális masszázs fajta, amely javítja a nyirokelfolyást. Rendszeres alkalmazása megszünteti a szöveti nyirokpangást, aktiválja az immunrendszert, serkenti a salakanyagok elszállítását, így a sejtek és a szövetek regenerálódását is elősegíti. Csökkenti a gyulladás-készséget, segíti a meglevő gyulladások, sebek gyógyulását. A nyomásterápiát használják a narancsbőr eltüntetésére, valamint a bőr feszesítésére. Nagyon hatékony kiegészítője a zsírbontó kezeléseknek.

Nyomásterápia alkalmas a következő problémák kezelésére: elsődleges (örökölt) nyirok ödéma, törést és sportsérülést követő ödéma, immobilizációs (mozgáshiányból eredő) ödémák, vénás elégtelenségek, végtag paralízis, végtagrángás, terhes nők végtagproblémái, krónikus érbetegség, zsírbontás, reumás ízületi gyulladás, bélműködés javítása, szorulás megakadályozása, stressztől zsibbadó végtagok, izomláz, idős/gyenge végtagok, fáradtság, unalom, álmatlanság, rugalmasabb bőr, egészségesebb test, mélyvénás trombózis, pulmonális embólia, visszeres érterápia és megelőzése.

Nyomásterápia előnyei: serkenti az ér- és nyirokrendszert, megelőzi a cellulitist és az ödémát, segít a fájó, elnehezülő végtagokon, megelőzi/késlelteti a visszérbetegségek kialakulását, javítja a bőr minőségét, rugalmasságát, méregtelenít, karcsúsít, felgyorsítja a sebek gyógyulását. Felgyorsítja az alakformáló kezelések által elfolyósított zsír kiürülését és így növeli azok hatékonyságát

Ellenjavallatok: Vese- és szívelégtelenség, Magas vérnyomás (csak gyógyszerrel kontrollált magas vérnyomású vendég kezelhető), Trombózis veszély, Láz, Fertőző, gyulladásos betegségek.

Készülék és használata:

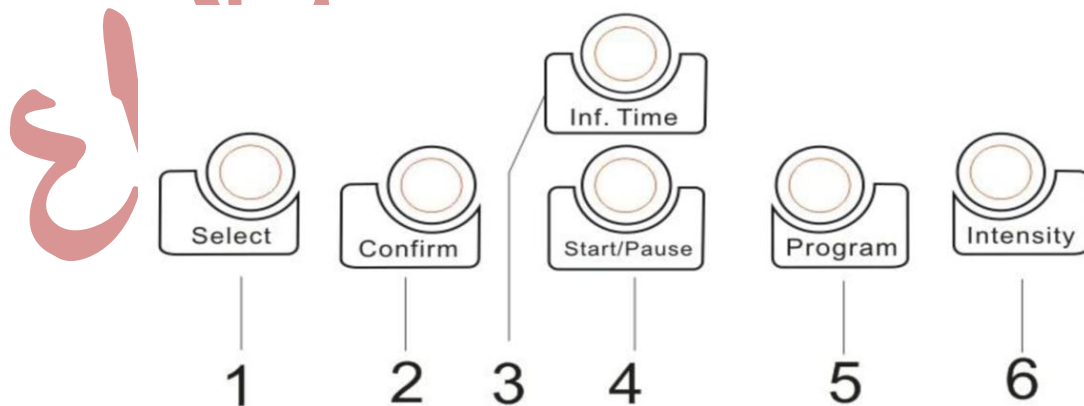


1) Kezelőgombok

1- Kimenet választó
4- Start/Stop


2- Kimenet aktiváló
5- Program mód választó

3- Ciklus idő választó
6- Intenzitás szabályzó

2) **LCD kijelző (alap állapotban)**

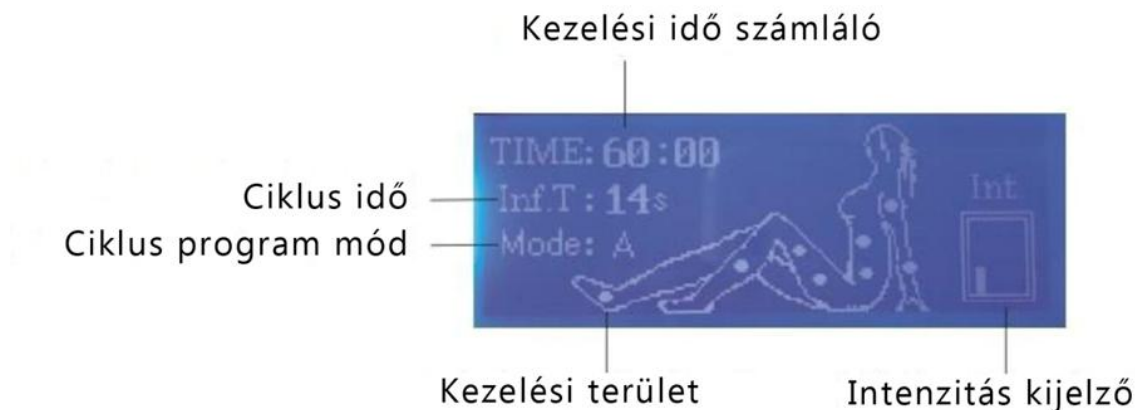

3) **Hálózati és tartozék csatlakozók a készüléken**

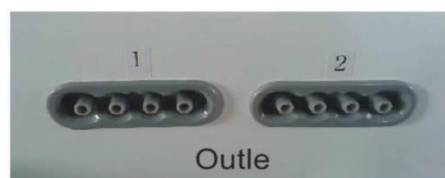

Tartozék csatlakozók

Nyilakkal jelölt oldallalt felfelé tartva
-Illessze az 1-es dugót az 1-es aljzatba
-Illessze az 2-es dugót az 2-es aljzatba

BE/Ki kapcsoló



Biztosíték 230V Hálózati kábel csatlakozó

3. Készülék üzembe helyezése

- 1) Csatlakoztassa a hálózathoz és kapcsolja be a készüléket.
- 2) Nyomja meg a '4'-es gombot és állítsa be a ciklus időt, az intenzitást és a ciklus módot.
- 3) 3db ciklus mód közül választhat (2-7-14mp), légkamrákat 1-8-ig használja a készülék:

- (A) Mód : 1-es felfűjt légkamrát leereszti és felfújja a 2-es légkamrát, a 2-es felfűjt légkamrát leereszti és felfújja a 3-as légkamrát... ez folytatódik egészen a 8-as légkamráig. A program ismétlődik.
- (B) Mód: 1-es légkamrát leereszti amíg a 3-as légkamrát felfújja, 2-es légkamrát leereszti amíg a 4-es légkamrát felfújja ez folytatódik egészen a 8-as légkamráig. A program ismétlődik.

- (C) Mód: 1-es légkamrát felfújva tartja amíg felfújja a 2-es légkamrát, felfújva tartja az 1-es és 2-es légkamrát amíg felfújja a 3-as légkamrát... Az előzőleg felfújt légkamrákat nyomás alatt tartja amíg a következőt fújja, ez folytatódik egészen a 8-as légkamráig. A program ismétlődik.
- (D) Mód: Egyidőben kétirányba halad a légkamrák felfújása. 4-es légkamrától az 1-es légkamráig és közben 5-ös légkamrától a 8-as légkamráig. A program ismétlődik.

4. Egyéni légkamrák kiválasztása:

A légkamra kiválasztásához nyomja meg az '1'-es gombot. Az LCD kijelzőn a kiválasztott légkamra mellett kör alakú jelzést talál ami a légkamra állapotát jelzi. A teli karika jelenti a használatban lévő légkamrát, az üres karika jelenti a használaton kívüli légkamrát (nem vesz részt a kezelésben).

5. Kezelési idő beállítása:

Állítsa meg a kezelést a '4'-es gombbal aztán az '5'-ös és '6'-os gomb használatával válassza ki a kívánt kezelési időt.

6. A készlet tartalma:

- Központi készülék : 1db
- Hálózati kábel : 1db
- Nyomásterápiás cső és csatlakozó szett : 2db
- Nyomásterápiás ruha szett : 1db
- Kezelési útmutató : 1db

Fontos megjegyzés:

- Ne tegyen a készülék és tartozékai közelébe gyúlékony folyadékot!
- Ne használja a készüléket PEACMAKER-t viselő személyen.
- Tilos a készülék burkolatát eltávolítani.
- Kezelések után fertőtlenítsen és tartsa tisztán a készüléket és tartozékait!

A készüléket importálja és forgalmazza:

ELKONcosmetic Kft.

H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.

Telefon/fax: (+36)-28-472 129

Web: www.elkon.hu

E-mail: elkon@elkon.hu

AUT-6014 kezelőprogramjainak felépítése:

[illegible]

"B" program (O=nyomás alatt, X=nyomás nélkül)									
Pr.szakasz→	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Testrész↓									
Boka	O	X	X	X	X	X	X	X	O
Lábszár	O	O	X	X	X	X	X	X	O
Térd	X	O	O	X	X	X	X	X	O
Comb	X	X	O	O	X	X	X	X	O
Has	X	X	X	O	O	X	X	X	O
Köldök	X	X	X	X	O	O	X	X	O
Alkar	X	X	X	X	X	O	O	X	O
Felkar	X	X	X	X	X	X	O	O	O

[illegible][illegible]