


EPI-BLEND Plus

Végleges szőrtelenítő készülék

Kezelési utasítás

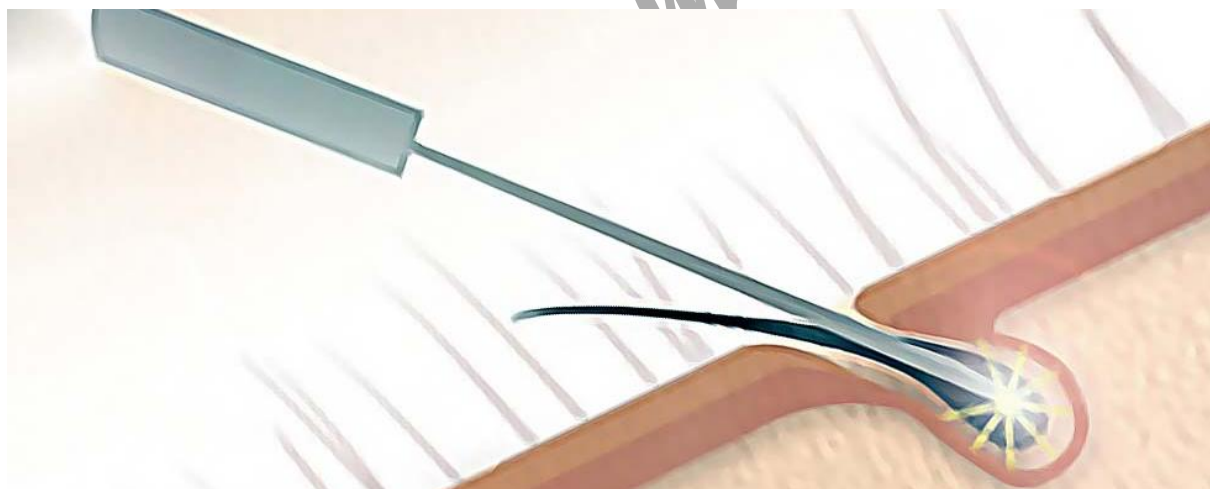


Gyártja és forgalmazza:
ELKONcosmetic Kft.
H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.
Telefon: +36-28-472129
www.elkon.hu
elkon@elkon.hu

Kezelőszervek ismertetése:



Tartozékok:

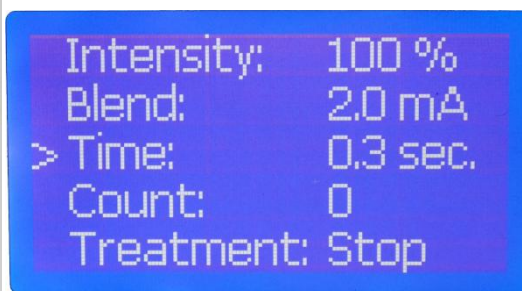

Tisztelt vásárló!

Az **EPI-BLEND Plus** egy mikroprocesszoros végleges szőrtelenítő készülék mely magában foglalja elődei minden előnyös tulajdonságát, a sok éves gyártási tapasztalatot, a szőrtelenítésben jártas kozmetikus szakemberek ajánlásait.

Főbb tulajdonságok:

- Egyszerű kezelhetőség
- Maximális hatékonyság
- Grafikus LCD kijelző
- Páciensvédelem
- Elektronikus védelmek a meghibásodások elkerülése végett
- Hosszú élettartam

Az ELKONcosmetic Kft. filozófiája a kompromisszum-mentes korszerű áramköri elemek és megoldások alkalmazása fejlesztéseiben és készülékeiben.

Az **EPI-BLEND Plus** készülék "lelke" egy mikroprocesszor, ami gépies fáradhatatlansággal felügyeli az egyes paramétereket és a páciens, hogy mindig a legoptimálisabb és leghatékonyabb kezelést lehessen vele elérni.

A grafikus LCD kijelzőn minden információt megtalálunk, ami nagy mértékben megkönnyíti a készülék eredményes használatát.

A készülék rendeltetése:

A készülék szakemberek (kozmetikusok) részére készült, és professzionális kozmetikai kezelés végezhető vele. A készülék egyesíti az ELEKTROLIZIS-es és a THERMOLIZIS-es módszert, melynek nagyszerűsége abban rejlik, hogy a bevezetett tűn egyidőben galvánáram (BLEND) tehát lűg, és nagyfrekvenciával keltett hőhatás (THERMO) is létrejön. Tehát mindkét módszer pozitív tulajdonsága egyesül, így az eredmény - végleges szőrtelenítés rövid idő alatt!

Az epilálásról általában:

A szőr növekedésének három fázisa van.

1. ANAGÉN, vagyis növekedési fázis. Ebben helyezkedik el legmélyebben a szőrtüsző.
2. KATAGÉN, vagyis hanyatló fázis. A szőr gyökere fokozatosan sorvad. A szőrtüsző egyre kevésbé mélyen helyezkedik el.
3. TELOGÉN, vagyis pihenő fázis. A legtöbb szőrszál amelyet sohasem vagy hosszú ideje nem kezeltek. A szőrtüsző majdnem a bőr felületén van.

Az ANAGÉN fázisban a tű könnyedén beszűrhető a szőrtüsző mélységéig. Eredményesen az ANAGÉN (növekvő) fázisban lévő szálát tudjuk kezelni, amikor még szorosan tapad a kötőszövethez, van tápanyag ellátása, vagyis élő.

A tű beszúrását a szőrszállal párhuzamosan, a szőrtüszőig kell végezni, ilyenkor a művelet fájdalommentes és vérzéssel sem jár.



Kezelés menete:

A tartozékokat csatlakoztassa a készülékhez.

Kapcsolja be a készüléket a hátoldalon található kapcsolóval.

A kijelzőn megjelenik az üdvözlő felirat.

Nyomja meg az OK gombot, kijelzőn láthatóak a beállítható paraméterek.

Az inaktív vezető gumielektrodáját bújtsa be a benedvesített párnába.

A rögzítő hevederrel csatolja fel vendége jobb karjára az így előkészített inaktív elektrodát.

Helyezze be az aktív elektroda tűbefogójába az epiláló tűt.

A navigációs gombokkal állítsa be a kívánatos kezelési értékeket.

Az OK gomb megnyomásával elkezdődik a kezelési idő számlálása.

Szúrja be a tűt az eltávolítandó szőrszál mellé.


Csipesszel fogja meg az eltávolítandó szőrszálát.

Lábkapcsolóval indítsa az impulzust, ekkor és az impulzus végén is "csippanó" hangot ad a készülék.

Az impulzus végén csipeszével húzza ki a szőrszálát.

Az impulzus számláló minden impulzus indítással eggyel többet mutat, ezzel kontrolálhatja az eltávolított szőrszálakat, így kalkulálhatja a kezelés díját.

Kezelés végén az OK gomb megnyomásával nullázhatja a számlálót.

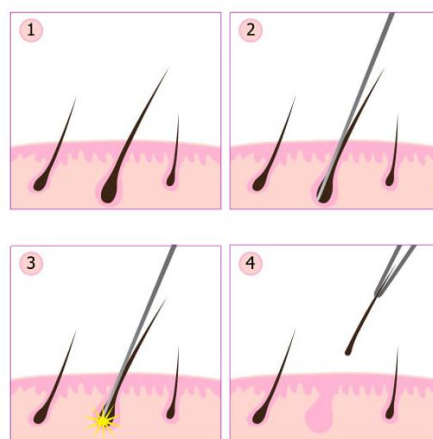

Csomag tartalma:

Készülék

Aktív vezeték

Tűbefogós elektroda

Inaktív vezeték

Közvető párna

Rögzítő heveder

Lábkapcsoló

Műszaki adatok:

Működési frekvencia 0,5MHz

BLEND áram 0-2,5mA

Impulzus idő 0,1-10 sec

Hálózati feszültség 230VAC

Fogyasztás 20VA

Gyártja és forgalmazza:

ELKONcosmetic Kft.

H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.

Telefon: +36-28-472129

www.elkon.hu

elkon@elkon.hu