

THM-53

THERMAGE FRAKCIONÁLT RÁDIÓFREKVENCIÁS KÉSZÜLÉK

Kezelési utasítása



Forgalmazza:

ELKONcosmetic Kft.

H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.

Telefon: +36-28-472129

www.elkon.hu

elkon@elkon.hu

Tartalom:

1. A frakcionált RF rendszer rövid bemutatása
2. A termék működési elvének bemutatása
3. A frakcionált RF hatásai
4. A frakcionált RF tulajdonságai
5. A frakcionált RF rendszer tartozékainak bemutatása
6. A frakcionált RF anti-aging készülék használata
7. Kezelőpanel
8. Kezelések
9. A készülék karbantartása
10. Csomaglista
11. Műszaki adatok

Fejcsatlakozó



Kezelőpanel (érintő képernyő)



Kezelőfej

Fejillesztékek



Vésszünetállító: Lenyomva azonnal kikapcsolja a készüléket. A készülék visszakapcsolásához a nyomógombot forgassa jobbra.

1. A frakcionált RF rendszer rövid bemutatása

A frakcionált RF rendszer fejlett többpólusú frakcionált rádiófrekvenciás technológiát nyújt. A frakcionált RF rendszer egyedülállóan intelligens módon a termikus hatásokat eltérő arányban képes a bőr mélyebb rétegeiben kifejteni, ezáltal elősegítve a kollagén termelődést, a bőr feszesítését, a cellulit csökkenését. A vendég igényének és bőrtípusának függvényében személyre szabott programok állíthatók be feszesítéstől kezdve a sérült bőrfelület kezeléséig. Sebészeti beavatkozás, mélyhámlassztás nélkül alkalmas a készülék bőrhámlásindító kezelés végzésére. A megereszkedett bőr, mély ráncok, tág pórusú bőr, akne, pigmentációs rendellenességek, akne hegek kezelésére alkalmas, továbbá a nyak, a szemkörnyék és az arckontúr javítására.

2. A készülék működési elvének bemutatása

Rádiófrekvencia a ránckezelésben


Az RF által kibocsátott hő hatására a szubkután szövetben természetes ellenállás jön létre, melynek következtében egyidejűleg a kollagén rostok összehúzódnak, stimulálva a szövetet újabb kollagén rostok összehúzóására, ezáltal kitöltve a kollagén hiányos helyeket, alátámasztva a bőrt, helyreállítva annak rugalmasságát.



Skin of collagen lost



RF treatment cycle

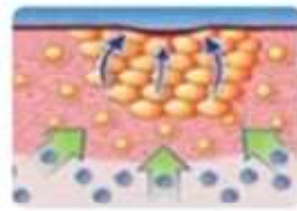

Skin of collagen regeneration

A kollagén termelődés folyamatos, tehát az irharéteg vastagsága és tömörsége növekszik, feltöltve a ráncokat, javítva a hegek állapotát, a bőr rugalmassága helyreáll, színe világosabb és tapintása puhább lesz. A megereszkedett bőr teltebbé, tömörebbé, ugyanakkor rugalmasabbá válik.

Hogyan működik a Thermage?

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik a Thermage, kicsit jobban meg kell ismernünk a bőr szerkezetét. Bőrünk 3 rétegből áll.

A látható külső réteget epidermisnek hívjuk, a középső, kollagénben gazdag réteget dermisnek, és a legmélyebb réteget, amely zsírszövetéről és a benne található kollagén rostok hálózatáról ismert, pedig subcutisnak.

Ha ezekben a rétegekben csökken a kollagén rostok mennyisége a korábbi, túlzásba vitt napozás, genetikai okok vagy a normál öregedési folyamat miatt, akkor az arc bőre megereszkedik és ráncosodik.

Természetesen azok a módszerek, amelyek csak a felületen hatnak, nem képesek a mélyebb rétegek kollagén termelését befolyásolni.


A Thermage az egyik leghatékonyabb műtét nélküli módszer, amely feszesíti a bőrt és megújítja a bőr mélyebb rétegének kollagén termelését is.

Az egyetlen módszer, mely a radiofrekvenciás technológiát úgy használja, hogy eléri vele a mély kollagén rost hálózatot is. Ez a technika azonnali feszesedést okoz, mellette pedig megújítja a bőr tónusát és szerkezetét is egyben. A hatása 6 hónap után éri el a maximális eredményt, a kialakult eredmény pedig több évig tartós.


A Thermage más kozmetikai és esztétikai plasztikai sebészeti módszernél gyorsabb és szövődménymentes.

A fototermikus elv

Az RF kezelőfejen keresztül a hő szakaszosan kerül a bőr mélyebb rétegeibe, kollagén tapadási hálót képezve. A hálós hőforrás segítségével kiküszöbölhető a túlzott RF hőhatás, azonban elérhető, hogy a kollagén rostok mégis elegendő hőt kapjanak a regenerálódáshoz és hozzátapadjanak a környező kollagénekhez tömör hálót képezve. Az egyetlen RF thermal háló, amely biztosítja a bőr kollagén rosthálójának felmelegedését.

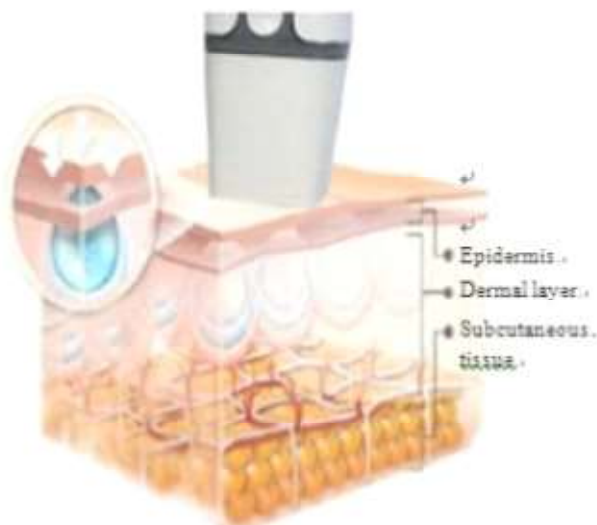

A frakcionált RF rendszer ideális rejuvenációs technológia a rádiófrekvenciás energiának a dermis meghatározott mélységben történő precízen kontrolált alkalmazásának köszönhetően. Az egyedülálló hálós szegmentált RF technológia, hálószerű energia bevitelt tesz lehetővé az irha rétegben.

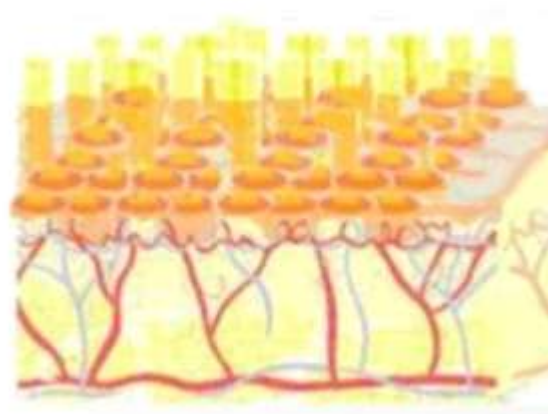

A rácsozaton keresztül a részekre osztott RF energia egyenesen ér a bőrfelszínhez elkerülve az égési sérüléseket, melyet a nem egyenletes energia okozhat. A hálós szegmentáció együtt a rácisos energia kibocsátással biztosítja a bőr minden részének biztonságos kezelését a kollagén regenerálódás serkentése érdekében, az irha és a bőr alja feszesítése céljából.

3. Frakcionált RF hatásai

Ránckezelés és rejuvenáció

A frakcionált RF növeli a bőr regeneráló képességét és a szöveti hőmérséklet emelkedés következtében felgyorsítja a véráramot, támogatja a test védekező mechanizmusait és serkenti az anyagcserét. Az arcmasszázs segítségével tovább fokozhatjuk az irha réteg stimulálásával a kollagén aktiválását, a véráram serkentésével támogathatjuk a bőrt a kívánt eredmény elérésében. A termikus hatást kihasználva a kezelés végén a masszázskrém gyors felszívódása tovább fokozza a kezelés hatékonyságát



Szeplők eltávolítása / bőrhálványítás

A hormon rendszer normalizálódása, az oxigén ellátás fokozásával a sejtek aktivitása növekszik és meggátolja a melanin termelődését.

Akne és aknés hegek elhalványítása

A magas hőmérsékletnek köszönhető antibakteriális hatás érvényesül, a faggyútermelés normalizálódik, a bőr regenerációs képessége javul, a felhám természetes hámlása normalizálódik.



A bőr rugalmasságának helyreállítása

A hő hatására a merev izmok ellazulnak, a véráram serkentésével javul az anyagcsere, a lerakódott zsírréteg lebomlik, a sejtek aktivitása nő rugalmassá téve a bőrt.

Javul a bőrszerkezet

A zsíros bőr esetén a tág pórusok szűkülnek, kitisztulnak, a bőr egyenletessé válik.

Fakó, élettelen bőrkép esetén serkenti a bőr oxigén felvevő képességét, javítja a vérkeringést, így élettelivé teszi a bőrt.



Szem környéki sötét karikák, szem alatti táskák, ödéma megszűnik.

Javulnak a test funkciók

Ér- és nyirokrendszer működését serkenti, ödéma visszahúzódik.



4. Frakcionált RF tulajdonságai

Az exkluzív kezelőfejek az Egyesült Államokban készültek.

A matricák segítségével lehetővé válik a precíz pozicionálás, a kezelés során felhasznált energia egyenletesen oszlik meg az arc felületén, így biztosítva a kollagén képződését.

Más készülékekhez képest 7-8-szor hatásosabb kezelést tud biztosítani a nagyfrekvenciás hővezetés.

A kollagén rostok aktiválása során újjáéledő kollagén segítségével létrejön a ráncatlanítás, feszesítés.

A beavatkozás 30% azonnali feszesedést eredményez, mellette javítja a bőr tónusát és szerkezetét is.

A további eredmény az új kollagén termelés beindulásának köszönhetően 6 hónapon keresztül folyamatosan észlelhető a kezelést követően.

A hatása 6 hónap után éri el a maximális eredményt, a kialakult eredmény pedig évekig látható. Nagy előnye, hogy nincs regenerációs idő, a páciens a kezelés után azonnal folytathatja normál életvitelét. A Thermage előnye közé tartozik még, hogy nem függ évszakoktól, így akár az erős nyári napsütésben is lehet végezni a beavatkozást. Minden bőrtípusnál és minden bőrszín esetében használható. A hazai és a nemzetközi tapasztalatok szerint, a Thermage kezelés a 35-60 év közötti nőknél és férfiakon mutatja a legjobb eredményeket. A Thermage kezelés hatását pedig tovább fokozhatjuk a kezelés után végzett kombinált, személyre szabott kozmetikai kezelésekkel.

5. A frakcionált RF rendszer tartozékainak bemutatása

YT-8013 1db Rádiófrekvenciás kezelőfejjel és 6 db RF fejjel

Hálós (piros) RF fej

Átmérő: 8 mm

Alkalmazás:

szemkörnyék mimikai ránckezelés, alsó szemhéj ránckezelés, szem alatti táskák



Frakcionált (fehér) RF fej

Méret: 20*20mm


Alkalmazás: Feszesítés, lifting, arckontúr feszesítés



Frakcionált (fehér) RF fej

Méret: 20*20mm


Alkalmazás: Feszesítés, lifting, arckontúr feszesítés

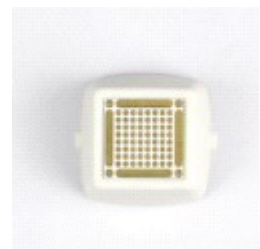

Frakcionált (fehér) RF fej

Méret: 20*20mm

Alkalmazás: Feszesítés, lifting, arckontúr feszesítés

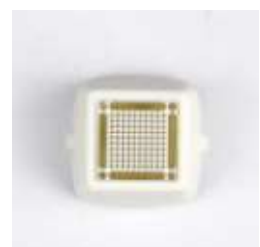

Hálós (piros) RF fej

Átmérő: 20mm

Alkalmazás: Ránckezelés az arcon, lifting, feszesítés



Hálós (piros) RF fej

Méret: 19*20mm

Alkalmazás: Face lifting, rejuvenáció, pigmentfolt halványítás, tág pórusok csökkentése



6. A frakcionált RF anti-aging készülék használata

Általános biztonsági figyelmeztetések:

Távolítson el a vendég minden fém tárgyat a testéről

Kapcsolja ki a mobil telefont vagy helyezze távol a kezelendő testfelülettől

A kezelés során érezhet bizonyos fájdalmat, ez normális

Soha ne használja a készüléket szemén és várandós nőn

Nem használható a készülék vérző vagy gyulladt bőrön, izületi gyulladás, gennyes fekély esetén.

Ne tegye ki a készüléket direkt napsugárzásnak vagy hőforrás közelébe.

Száraz helyen kell tartani a gépet, gőztől óvni kell (szauna, fürdő) különben károsodhat.

Óvjuk a készüléket ütéstől, leeséstől.

Tilos vegyszerekkel törölgetni (etil alkohol, benzin)

Ne használja túl hosszú ideig, tartsa be a pihenő időt.

A készülék arckezelésre lett kifejlesztve, kerülni kell a szem környékét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

A készüléket tilos felnyitni, ebben az esetben elveszti a garanciát.

A készülék nem használható más célra, mint a használati utasításban foglaltak.

Az alábbi esetekben tilos használni a készüléket:

Ödéma, magas vérnyomás

Görcs, vagy irritált bőrfelület

Szívbetegség (pacemaker)

Allergiás bőrfelületen, fekély vagy sérülés esetén

Visszértágulat felett, törés helyén, rosszindulatú daganat esetén

Súlyos vérvesztés, vérzési rendellenességek, véralvadási problémák esetén

Plasztikai sebészeti beavatkozás, mélyhámlassztás után, sugárkezelések között.

Fülön és környékén.

Epilepszia, trombózis, érgyulladás, migrén esetén nem használható a készülék.

Sebészeti beavatkozás után a lábadozás időszakában nem ajánlott a kezelést alkalmazni.



Csak hozzáértő személy működtetheti a készüléket!

Figyelmeztetések a gép használata előtt:

Előkészülete: bőrfertőtlenítő, matricák, vattakorong, bőrápoló készítmény

1. Tisztítsuk meg a bőrfelületet, fertőtlenítsük. Szükség esetén alkalmazhatunk fájdalomcsillapítót.
2. Vágjuk ki az alkalmazni kívánt matricákat, melyeket át kell törölni 95 ° alkohollal, hogy a háló látszódjon a bőrfelületen.
3. Csatlakoztassa a kezelőpisztolyt, és válassza ki a megfelelő kezelőfejet.
4. Csatlakoztatás után kapcsolja be a készüléken található gombot.

7. Kezelőpanel:

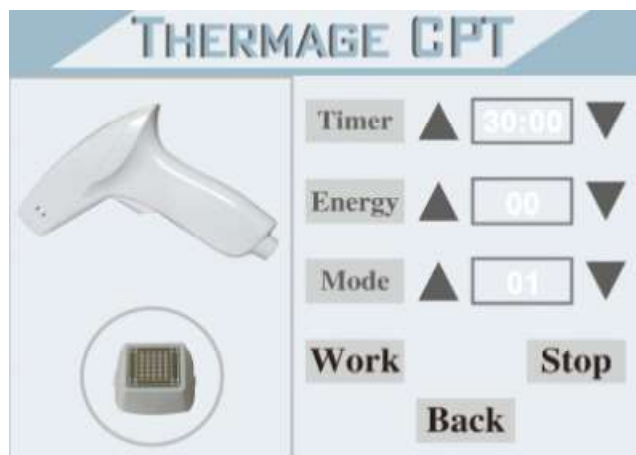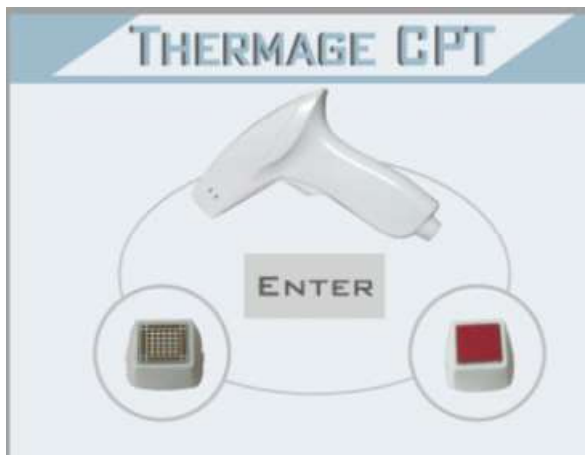

8. Kezelések

Frakcionált RF kezelés (Fehér kezelőfej)

A kezelést alkalmazhatjuk teljes testfelületen fogyasztásra, szülés utáni has körfogat csökkentésre, fogyás utáni feszesítésre, kar, comb feszesítésre, stria kezelésre.

A kezelést 3-5 naponta ismételhetjük, 5-8 kezelés elegendő. Egy kezelés 20-30 perc a testen.

Hálós RF kezelés (Piros kezelőfej)

A kezeléssel az arc és alsó szemhéj ráncait csökkenthetjük, valamint face lifting, rejuvenáció, pigmentfolt halványítás pórusok összehúzódása érhető el.

A kezelést 3-5 naponta ismételhetjük, 7-10 kezelés elegendő. Egy kezelés 15-25 perc a testen.

Kezelés menete



9. A készülék karbantartása

A készüléket földelt hálózati aljzatról működtesse. A működési idő nem haladhatja meg az 1 órát, 10-30 perc szünetet kell tartani 1 óra működési idő után. A gépet és tartozékait tilos oldószerrel tisztítani, tisztítás után száraz ronggyal törölje át. Ne tegye ki sugárzó hőnek. Ne működtesse erősen párás környezetben.

10. Csomaglista:

1db Készülék
1db Kezelőfej
6db Kezelőfej illeszték
1db Fejtartó
1db Hálózati vezeték
1db Kezelési utasítás

11. Műszaki adatok:

Hálózat:	230VAC
Frakcionált RF frekvencia	5MHZ
Frakcionált RF energiaszint	1-25J/CM
Frakcionált/Hálós RF fejek	3-3 féle
Frakcionált RF élettartam	végtelen sok impulzus leadására alkalmas
RF fej illesztékek	hálós tűvégek: 59 tű, 188 tű, 289 tű Frakcionált RF tűvégek: 36 tű, 64 tű, 100 tű
Frakcionált RF mérete	8 mm, 4 cm ²
Gépkezelés	8 inch színes érintő képernyő
Thermal RF típus	interval impulzus
Thermal RF frekvencia	5 MHZ
Thermal RF üzemmód	0,5 sec - 1 sec - 2 sec.

Forgalmazza:

ELKONcosmetic Kft.

H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.

Telefon: +36-28-472129

www.elkon.hu

elkon@elkon.hu