



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEGANTE 882 2in1 VIO + HIDROABRÁZIÓ

862 HF/M-882 modell

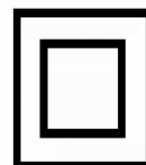

Műszaki adatok:

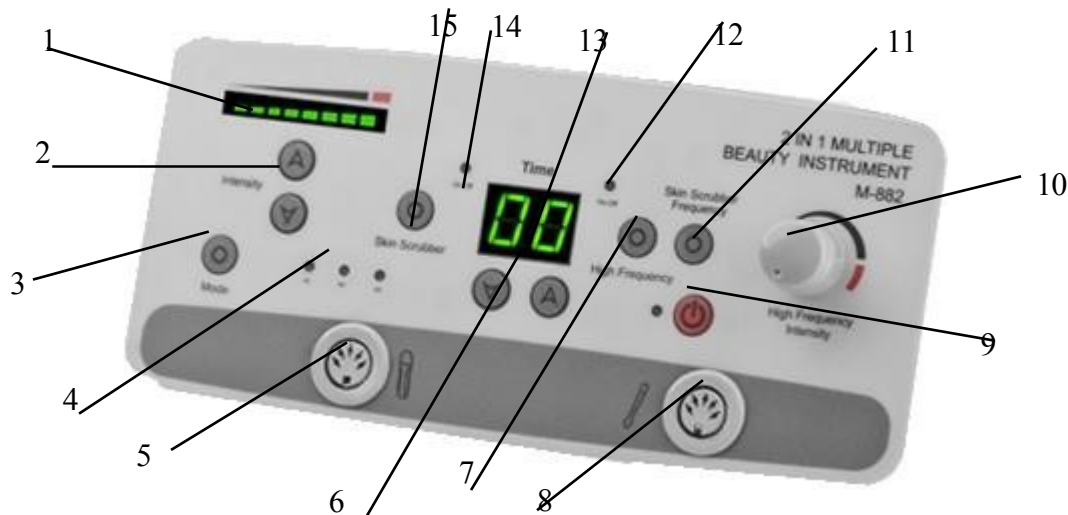

1. Intenzitási index
2. Intenzitáásszabályozás
3. A kavitációs hámlasztás kezelési lehetőségének kiválasztása (M1- kavitációs hámlasztás, M2- szonoferezis, M3- szonoferezis, M3- szonoferezis, M3- szonoferezis).
4. A megfelelő kavitációs hámlasztó kezeléshez tartozó működési fény,
5. Kavitációs hámlás csatlakoztatása,
6. Az üzemidő beállítása,
7. A kezelési lehetőség kiválasztása - darsonval,
8. vio csatlakoztatása
9. Vio/ kavitációs peeling indítása/leállítása,
10. A vio intenzitás beállítása,
11. A spatula teljesítményének beállítása a kavitációs hámlasztáshoz
12. vio kontrollámpa
13. Idő kijelzés,
14. Kavitációs hámlasztó munkafény,
15. A kezelési lehetőség kiválasztása - kavitációs hámlasztás

VIO

A D'Arsonval-áram a nagyfrekvenciás áramok egyik változata. A készülék az elektródában fellépő elektrosztatikus kisülések segítségével állít elő ózont.

A d'Arsonval-áramok hatása elsősorban az erekre és a vegetatív idegvégződésekre gyakorolt hatáson alapul. Az elektróda és a bőr között létrejövő szikrázás az erek értágulását okozza, és hatással van a bőr alatti szövetekre. A keletkező ózon fertőtlenítő hatású. A készülékben 3 pellet közül lehet választani. A kezelés 5-7 percig tart.

INDIKÁCIÓK:

- Bőrérzékelési zavarok,
- Alopecia areata,
- A keringési rendszer stimulálása,
- Bőrfertőtlenítés,

ELLENJAVALLATOK:

- Terhesség
- Hipertónia
- Duzzanatok
- Ideges hiperaktivitás
- Szívbetegségek
- Gyulladásos bőrbetegségek
- Láz
- Asztma

- Epilepszia
- Fém implantátumok
- Akne rosacea
- Kitágult erek
- Allergiás bőrbetegségek

Használati utasítás

1. Csatlakoztassa a darsonwala fogantyút a 8-as bemenethez.
2. Állítsa be a kezelési időt a 6. gomb segítségével.
3. Nyomja meg a 7-es gombot a darsonwala készenléti lámpa (12) kigyulladás.
4. A tárcsával (10) állítsa be a kezelés intenzitását.
5. Nyomja meg a 9-es gombot a kezelés elindításához.

A **kavitációs peeling** lényegében a bőr fájdalommentes tisztítása ultrahangos rezgéssel. Lehetővé teszi a pórusokból és a szőrtüszőkől a felesleges faggyú alapos eltávolítását, valamint a mitesszerek eltávolítását. A hámlasztás során a kavitáció jelensége lép fel, amely akkor következik be, amikor az ultrahang folyadékkal érintkezik, majd mikroszkopikus gázbuborékok keletkeznek, és kémiai folyamatok sorozata eredményezi a szaruréteg elhalt sejtjeinek lebomlását.

EREDMÉNYEK

- Ovális arc és állfelvarrás,
- A bőr szerkezetének feszesítése,
- Felületes ráncok simítása,
- A szem alatti táskák és a szarkalábak csökkentése,
- Kollagén rekonstrukció,
- Anti-aging terápia - megelőzés,
- A szennyeződések, kitágult pórusok csökkentése,
- A bőr szerkezetének feszesítése.
- Bőrtisztítás.

Használati utasítás

1. Csatlakoztassa a kavitációs hámlasztó spatulát az 5. bemenethez,
2. Válassza ki a kezelési időt a 6. gomb segítségével,
3. Válassza ki a kezelés típusát a 3. gomb segítségével,
4. Válassza ki a kezelés intenzitását a 2. gomb segítségével (az intenzitásjelző megjelenik az 1. kijelzőn.),
5. Nyomja meg a 15. gombot, a kavitációs hámozási készenléti lámpa (14) kigyulladás,
6. Nyomja meg a 9-es gombot a kezelés elindításához.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokön kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus végezhet!
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a szervizhez!

a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolat megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon a következőkhöz a veszélyek elkerülése végett egy erre felhatalmazott szervizközpont által.
2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban

Ami az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát illeti, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát elkülönítve kell gyűjteni, és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékgyűjtő pontjain kell leadni.

Az elhasználdott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni!

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket csak eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.