



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEGANTE 1897 5IN1 MIKRO + VÁKUUM + DARSONVAL + ULTRAHANG + SPRAY

M-1897-es modell

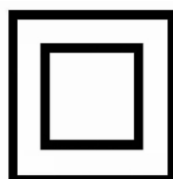

Műszaki adatok:

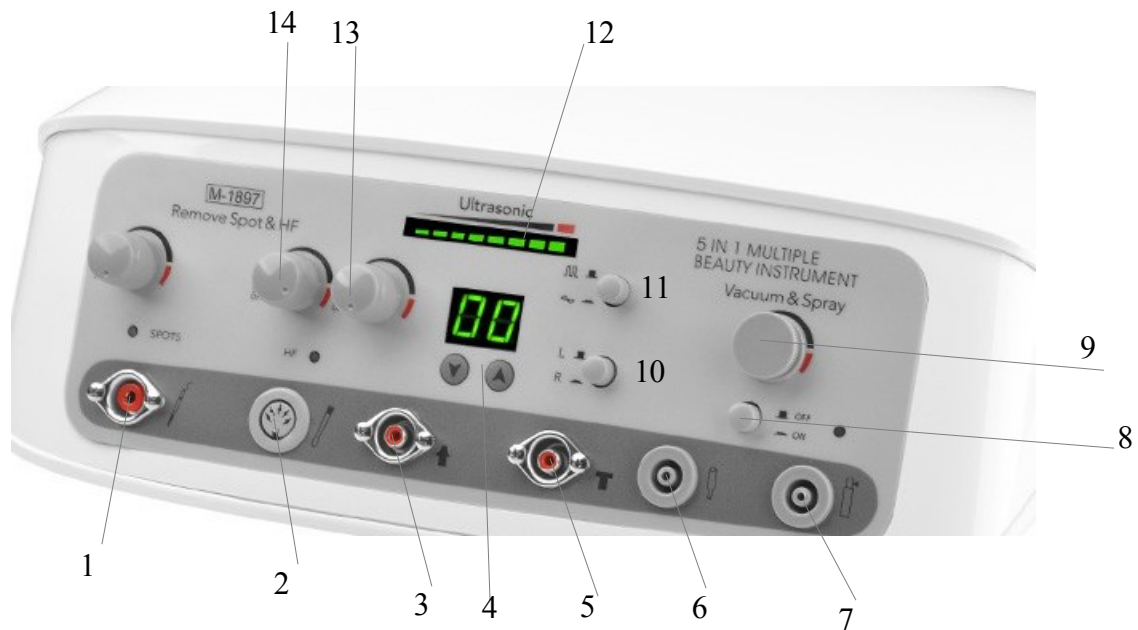

1. Az elektrokoaguláció csatlakoztatása,
2. A vio összekapcsolása,
3. Ultrahangfej csatlakoztatása,
4. Időbeállítás,
5. Ultrahangfej csatlakoztatása, 6. Vákuum és mikrodermabrázió csatlakoztatása,
7. Csatlakozó spray,
8. Be/ki vákuum és mikrodermabrázió,
9. Szívóteljesítmény beállítása,
10. Az ultrahangos kezelőfej kiválasztása,
11. Az ultrahangos kezelés hullámformájának kiválasztása,
12. Ultrahang intenzitás kijelző,
13. Állítható ultrahang intenzitás,
14. A darsonval intenzitás beállítása,

VIO

A D'Arsonval-áram a nagyfrekvenciás áramok egyik változata. A készülék az elektródákban fellépő elektrosztatikus kisülések segítségével állít elő ózont.

A d'Arsonval-áram hatása elsősorban az erekre és a vegetatív idegvégződésekre gyakorolt hatáson alapul. Az elektróda és a bőr között keletkező szikra az erek kitágulását okozza, ami hatással van a bőr alatti szövetekre. A keletkező ózon fertőtlenítő hatású. A kezelés 5-7 percig tart.

INDIKÁCIÓK:

- Bőrzérzékenységi zavarok,
- Alopecia areata,
- A keringési rendszer stimulálása,
- Bőrfertőtlenítés,

ELLENJAVALLATOK :

Terhesség
Hipertónia
Ödéma
Idegi hiperaktivitás
Szívbetegségek
Gyulladásos bőrbetegségek
Láz
Asztma
Epilepszi
a
Fém implantátumok Akne
rosacea
Kitágult erek Allergiás bőrbetegségek

ULTRAHANG

Ez egy olyan módszer, amely a hatóanyagokat mélyen a bőrbe szállítja. A készülék kihasználja a sejtmembránokban az ultrahang hatására fellépő fizikai jelenséget, amelynek köszönhetően egyetlen kezelés hatása akár 72 órán keresztül is megmarad a bőrben.

A kezelés teljesen fájdalommentes, a kezelés során az ügyfél érezheti a fejéből érkező enyhe rezgést.

Spray

Kíméletes bőrfeszesítésre szolgál a vákuum és a tartályban lévő tonik segítségével.

MIKRODERMABRÁZÍÓ

Ez egy olyan kezelés, amely során a felhám felszíni rétegeit csiszoló gyémánthegek és szívóerő segítségével hámlasztják.

A mikrodermabrázió hatékony kezelés a finom vonalak, a szarkalábak, a hiperpigmentáció és az aknés hegek csökkentésére. Serkenti a bőrsejtek és a kollagén épülését. Nagyon népszerű nem invazív kozmetikai kezelés. Rendszeres használat esetén minden bőrtípus esetében nagyszerű eredményeket produkál. Az eredmények azonnal észrevehetőek.

Jelzések

- pattanásos hegek,
- mitesszerek, mitesszerek,
- kitágult pórusok,
- érdes, bőrkeményedésszerű bőr,
- a bőr petyhüdtsége,
- bőrfiatalítás és a szem, a száj és a nyak körüli finom vonalak és ráncok eltüntetése,
- striák,
- száraz bőr,
- elszíneződés és elszíneződés,
- a bőr (arc, kéz, nyak) napozás okozta károsodása,
- periwinkle keratosis,
- Acne vulgaris (comedonális, papuláris),

- faggyúmirigy.



Ellenjavallatok

- vírusfertőzések,
- bakteriális fertőzések,
- gombás fertőzések,
- gennyes és gennyes pattanások,
- rosacea,
- szemhéjbőr,
- megszakadt bőrfolytonosság,
- bőrrák és anyajegyek,
- angiomák
- Pattanásos kezelés Roaccutannal (legalább 3 hónapos szünet ajánlott),
- hajlam a keloidok (hegesedés) kialakulására,
- arcplasztika (legalább két hónapos szünet ajánlott).

Figyelem!

A mikrodermabráziós kezeléshez használt fejeknek tisztának és fertőtlenítettnek kell lenniük. A kezelést száraz bőrön végezzük.

A mikrodermabrázióhoz használt pamutszűrők eldobhatóak. Fejmozgások

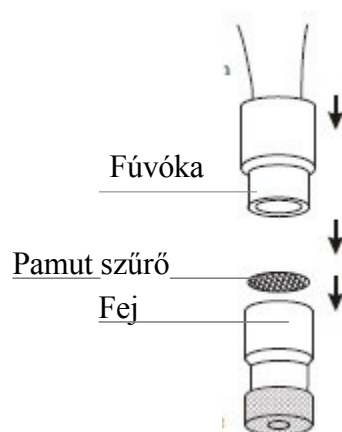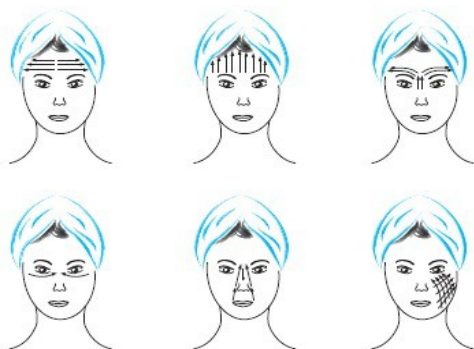

Vákuum

Ez egy olyan eljárás, amely szívóerőt és a kezelési területhez igazodó kéziparabokat használ.

INDIKÁCIÓK:

- mitesszerek,
- kitágult pórusok,
- érdes, bőrkeményedésszerű bőr,
- a bőr petyhüdtsége,
- striák,
- **száraz bőr.**



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. Ne szedje szét a készüléket, és ne próbálja meg a jelen kézikönyvben megadottaktól eltérő célokra használni. Bármilyen szervizelést és javítást csak hivatalos szerviztechnikus végezhet
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a szervihez!:

- a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket feldöntötték, vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
 6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
 7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
 8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
 9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
 10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközpontoz - így elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelben gyermekek vagy a készülék használatához szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektromos berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelően

Az elektronikai hulladékot külön kell gyűjteni, és az elektronikai és elektromos hulladékok gyűjtőhelyére kell vinni.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra a megfelelő gyűjtőpontokon kell leadni!

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.